




این pdf هوشمند بوده و دکمه و آیکون‌های موجود در صفحات قابل لمس می‌باشد



لطفا در صورت غیرفعال بودن دکمه ها در سیستم عامل اندروید حتما اپلیکیشن google drive خود را به روزرسانی نمایید



متوجه شدم

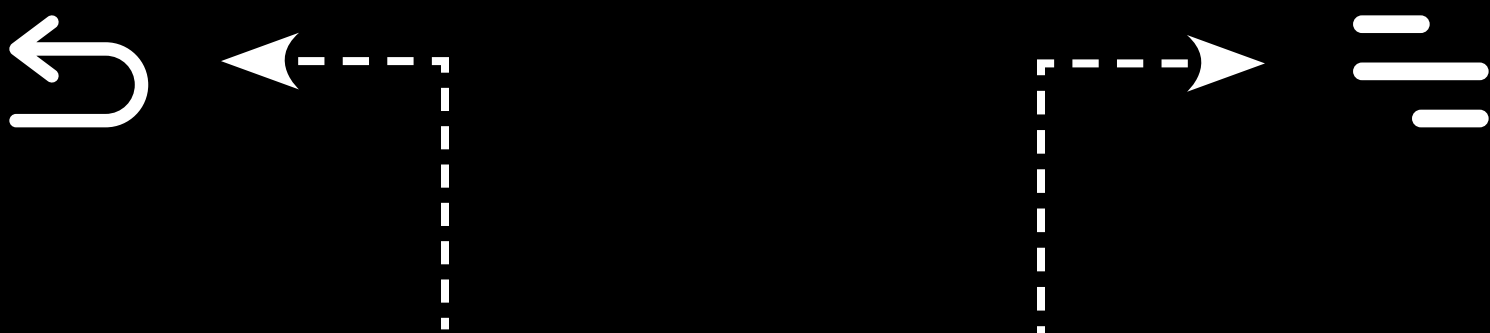


برای بازگشت به مرحله قبل
از این نماد استفاده کنید

برای دسترسی به فهرست در هر بخش
از این نماد استفاده کنید

متوجه شدم

برای جابجایی بین صفحات مختلف از یک بخش
از این دکمه‌ها استفاده کنید

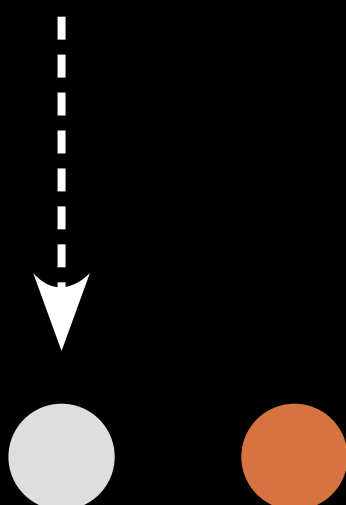



محتویات این کاتالوگ متعلق به مجموعه تجارت دیبا پاسارگاد می باشد

TEJARAT DIBA PASARGAD All right reserved

Ver:2026-7.0



PIKO DESIGN

طراحی و اجرا توسط پیکو دیزاین

برای **ادامه** یک گزینه را انتخاب کنید



درباره‌ی ما



فهرست محصولات



تماس با ما



درباره ما

تجارت دیبا پاسارگاد؛ تبلور کیفیت و تخصص در تجهیزات دندانپزشکی

شرکت تجارت دیبا پاسارگاد، از سال ۱۳۸۶ با چشم‌اندازی مبتنی بر تعالی و استانداردهای جهانی، گام در مسیر واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور نهاد. باور بنیادین ما همواره بر این بوده است که دندانپزشکان و متخصصین کشور، شایسته بهره‌مندی از پیشرفته‌ترین ابزارهای روز جهان هستند تا با تکیه بر دقت و کارایی آن‌ها، فرآیند درمان را با اطمینان خاطر بیشتری به سرانجام برسانند.

ما در تجارت دیبا پاسارگاد، با نگاهی دقیق و گزینش‌گرانه، تنها به همکاری با پیشگامان این صنعت می‌اندیشیم. این شرکت به عنوان نماینده انحصاری سه قطب تراز اول تجهیزات دندانپزشکی، سبد محصولاتی متمایز را به جامعه دندانپزشکی ایران تقدیم می‌کند:

- **برند Denco (دنگو):** نامی خوش‌نام و پرفروش در زمینه فایل‌های روتاری می‌باشد. این برند به پشتوانه کیفیت ساخت بالا و عملکرد پایدار، به انتخابی معتبر برای دندانپزشکان و متخصصین در سراسر کشور تبدیل شده است.

- **برند Eighteeth (ایتیس):** پیشرو در طراحی و تولید تجهیزات کلینیکی هوشمند می‌باشد. محصولات این کمپانی، از اندوموتور و اپکس‌لوکیتورهای دقیق، لایت‌کیورها، دستگاه‌های آبچوریشن، موتورهای ایمپلنت، اسکنرهای داخل‌دهانی، سنسور RVG، الکترونیک موتور و دستگاه‌های سونیک و اولتراسونیک، با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا، استاندارد و تازه از دقت و کارایی را در درمان‌های اندودانتیکس و ایمپلنت تعریف کرده‌اند.

- **برند Zumax (زومکس):** پیشگام بی‌رقیب تکنولوژی بزرگ‌نمایی در چین می‌باشد. زومکس با تمرکز تخصصی بر تولید میکروسکوپ‌ها و لوپ‌های پیشرفته، امکان مشاهده دقیق‌ترین جزئیات را برای شما فراهم آورده تا مرزهای دقت در درمان جابه‌جا شود.

اعتبار ما تنها به واردات تجهیزات تراز اول محدود نمی‌شود؛ بزرگ‌ترین سرمایه تجارت دیبا پاسارگاد، شبکه گسترده و زیرساخت‌محور خدمات پس از فروش در سراسر کشور است. ما به این باور پایبندیم که «فروش، نقطه آغاز تعهد است». از همین رو، تیم فنی و متخصص ما با پشتیبانی کامل، در کنار شماست تا با خیالی آسوده، تمامی تمرکز خود را بر ارائه بهترین درمان به بیماران‌تان معطوف کنید.

تجارت دیبا پاسارگاد؛ حلقه اتصال تکنولوژی برتر جهان و دستان توانمند دندانپزشکان و متخصصین ایران.



برند مورد نظر خود را انتخاب کنید

ID **DENCO**TM
— FREE ENDO WITH IT —

 **Eighteenth**

zumax



گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

Rotary Endodontic Files

Reciprocating System

Manual Files

File Holder & Plugger



Rotary Endodontic Files

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

SUPER FILES III

D-Super Files

PA-FILES

PRO-PATH

Pro-Flexi FILES

D-FILES



Rotary / D-Super Files



D-SUPER FILES

ویژگی‌های فنی:

- **آلیاژ:** این فایل‌ها ساخته شده از آلیاژ نیکل تیتانیوم (NiTi) با کیفیت بالا هستند که پس از فرآیند عملیات حرارتی (Heat Activation) به رنگ طلایی در می‌آیند.
- **طراحی و عملکرد:** سطح مقطع مثلثی محدب، با ایجاد برندگی مطلوب و تخلیه مؤثر دبری‌ها، شکل‌دهی ایمن و کارآمد کانال ریشه را فراهم می‌کند.
- **کاربرد:** مناسب برای آماده‌سازی کانال‌های ریشه ساده و کانال‌های با انحنای کم تا متوسط، به‌ویژه در دندان‌های قدامی و بسیاری از دندان‌های خلفی.

مشخصات:

سایزها: Assorted: SX-F3 | SX، S1، S2، F1، F2، F3، F4، F5

طول: 21، 25 و 31 میلی‌متر

تعداد در بسته: 6 عدد

تنظیمات پیشنهادی اندو موتور:

سرعت: 150-350 rpm

گشتاور: 2 - 2.5 N.cm



بسته بندی	گوتا پرکا متناسب	قطر نوک (میلی متر)	تیپر (%)	سطح مقطع	سایز	طول (میلی متر)
6pcs/box or blister Single or Assorted	/	0.19	3.5 - 19		SX	19
	/	0.17	2 - 11		S1	21/25/31
	/	0.20	4 - 11.5		S2	
	F1	0.20	7		F1	
	F2	0.25	8		F2	
	F3	0.30	9		F3	
	F4	0.40	6		F4	
	F5	0.50	5		F5	



Rotary / D-Super Files

توالی پیشنهادی آماده سازی کانال:

1. آماده سازی مسیر اولیه (Glide Path)
2. بررسی مسیر کانال با فایل دستی K-file شماره ۱۰ یا ۱۵.
3. استفاده از فایل SX برای آماده سازی بخش کروئالی کانال، سپس ادامه آماده سازی با فایل S1.
4. تعیین طول کارکرد (Working length) با استفاده از فایل دستی شماره ۱۵.
5. استفاده از فایل S1 تا رسیدن به طول کارکرد.
6. استفاده از فایل S2 تا رسیدن به طول کارکرد.
7. استفاده از فایل F1 تا رسیدن به طول کارکرد.
8. استفاده از فایل F2 تا رسیدن به طول کارکرد.
9. استفاده از فایل F3 تا رسیدن به طول کارکرد (در صورت نیاز).

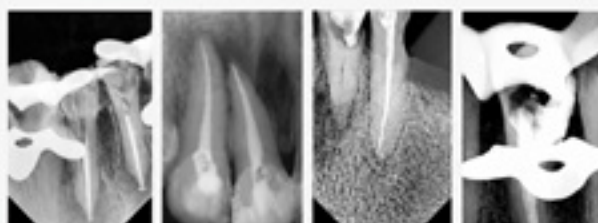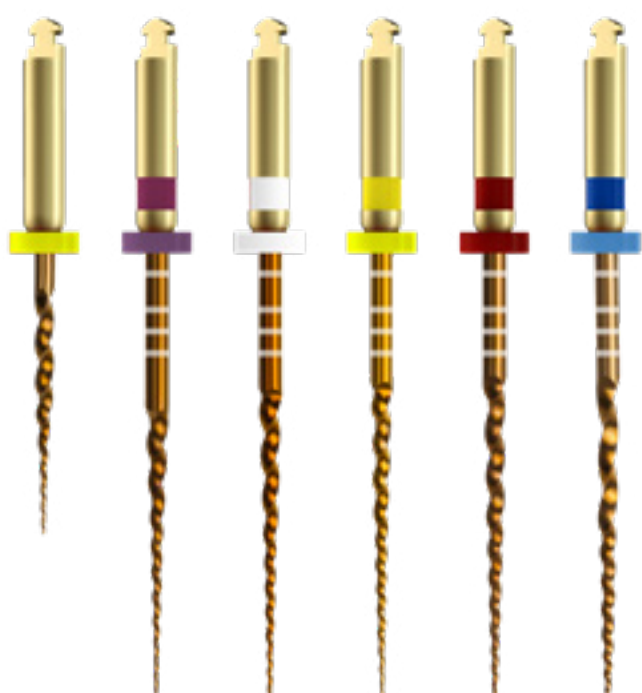



Rotary / **SUPER FILES III**

ویژگی‌های فنی:



- **آلیاژ:** این فایل‌ها ساخته شده از آلیاژ نیکل-تیتانیوم (NiTi) با کیفیت بالا هستند که پس از فرآیند عملیات حرارتی (Heat Activation) به رنگ آبی در می‌آیند.
- فایل‌های Blue با انعطاف‌پذیری بالا، مقاومت مناسب و قابلیت پیش‌خم (Pre-curved)، برای کانال‌های باریک، کلسیفیه، با انحنای شدید و سایر کانال‌های پیچیده طراحی شده‌اند.
- انعطاف‌پذیری بالای این فایل‌ها، آماده‌سازی ایمن و قابل‌اعتماد کانال‌های ریشه با **انحنای متوسط تا شدید** را امکان‌پذیر می‌کند.



SUPER FILES III

ویژگی‌های طراحی:

- **سطح مقطع:** مثلث محدب
- **نوک ایمن:** کاهش احتمال ایجاد انحراف کانال (Canal Deviation) و افزایش کنترل حین آماده‌سازی.
- **طراحی با تیپر متغیر:** بهبود راندمان آماده‌سازی و کاهش تنش وارد بر فایل.

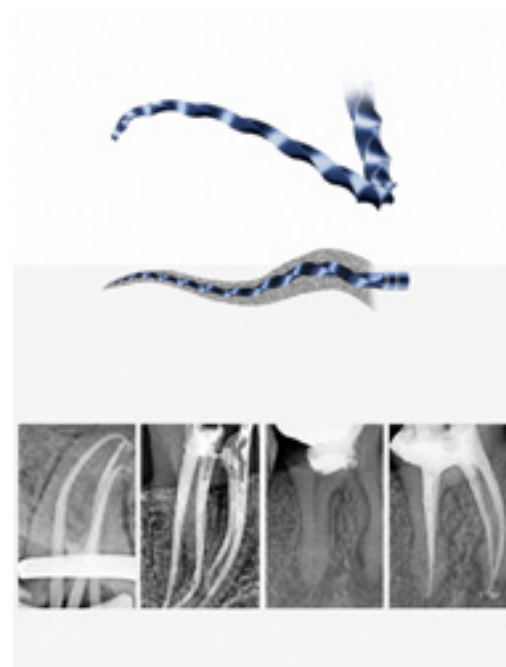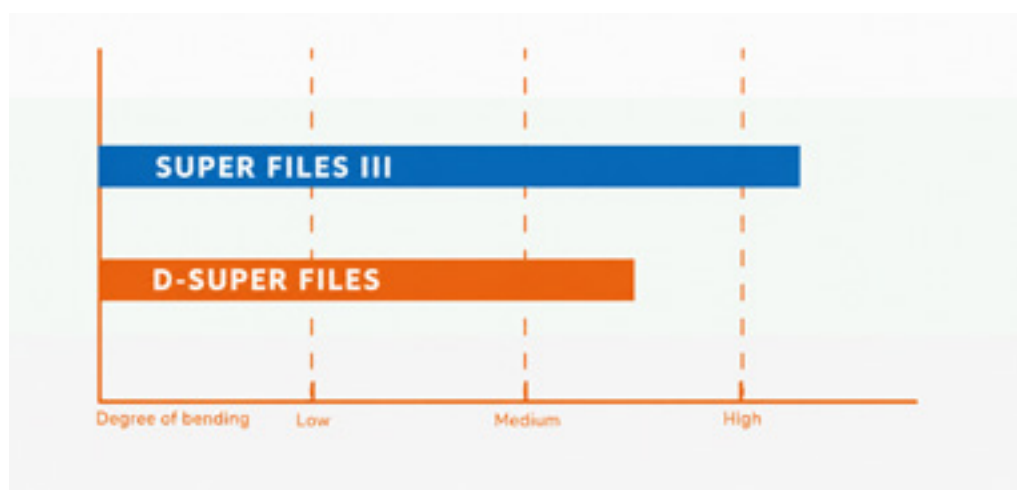



Rotary / **SUPER FILES III**



مشخصات:

سایزها:

Assorted: SX-F3 | SX، S1، S2، F1، F2، F3، F4، F5

طول: 21، 25 و 31 میلی‌متر

تعداد در بسته: 6 عدد

تنظیمات پیشنهادی اندو موتور:

سرعت: 150-350 rpm

گشتاور: 2 - 2.5 N.cm

بسته بندی	گوتا پرکا متناسب	قطر نوک (میلی متر)	تیپر (%)	سطح مقطع	سایز	طول (میلی متر)
6pcs/box or blister Single or Assorted	/	0.19	3.5 - 19		SX	19
	/	0.17	2 - 11		S1	21/25/31
	/	0.20	4 - 11.5		S2	
	F1	0.20	7		F1	
	F2	0.25	8		F2	
	F3	0.30	9		F3	
	F4	0.40	6		F4	
	F5	0.50	5		F5	

نکته: توالی پیشنهادی آماده‌سازی کانال با فایل‌های Super Files III به‌صورت شماتیک در تصویر زیر نمایش داده شده است.

OPERATION PROCESS





Rotary / PRO-PATH

ویژگی‌های فنی:

- **متریال:** این فایل‌ها از آلیاژ نیکل - تیتانیوم (NiTi) با انعطاف پذیری بالا ساخته شده‌اند و مقاومت مناسبی در برابر خستگی سیکلی دارند.
- **نوک غیربرنده فایل،** خطر جابجایی مسیر کانال (Canal Transportation) را کاهش داده و به حفظ مسیر طبیعی کانال ریشه کمک می‌کند.
- **طراحی تیپر افزایشی (Progressive Taper)،** ایجاد Glide Path را تسهیل کرده، فشار وارد بر فایل‌های شکل‌دهنده بعدی را کاهش داده و احتمال شکست فایل، انسداد کانال و تشکیل لُج را به حداقل می‌رساند.

کاربرد:

1. ایجاد مسیر اولیه کانال ریشه (Glide Path) پیش از شکل دهی و پاکسازی کانال.
2. این فایل‌ها برای ایجاد Glide Path و آماده سازی اولیه کانال ریشه طراحی شده‌اند و حتی در کانال‌های باریک، پیچیده و دارای انحنای شدید، پیشروی روان، ایمن و قابل اعتماد را فراهم می‌کنند.

ویژگی‌های طراحی

سطح مقطع: مربعی (Square Cross-section)

طراحی تیپر: افزایشی (Progressive Taper)

مشخصات:

سایزها: #016

تیپر: 0.02 - 0.06

طول: 25 میلی‌متر

تعداد در بسته: 6 عدد

تنظیمات پیشنهادی اندو موتور:

سرعت: 300 rpm

گشتاور: 1.5 - 2.5 N.cm

بسته بندی	قطر نوک (میلی متر)	تیپر (%)	سایز	طول (میلی متر)
6pcs/box	0.15	2-6	#016	21/25/31




Rotary / PA-FILES

ابزار تخصصی برای آماده‌سازی اولیه کانال (Glide Path)

ویژگی‌های فنی:

- آلیاژ: این فایل‌ها ساخته شده از آلیاژ انعطاف پذیر نیکل - تیتانیوم (NiTi) با کیفیت بالا هستند.
- کاربرد اصلی این فایل‌ها ایجاد مسیر اولیه در کانال ریشه و تسهیل مراحل بعدی شکل‌دهی کانال.
- این فایل‌ها با انعطاف‌پذیری بالا، عبور ایمن از کانال‌های باریک و خمیده را تسهیل کرده و احتمال گیرکردن یا شکست فایل را کاهش می‌دهند.
- در مقایسه با فایل‌های دستی استیل، آماده‌سازی اولیه کانال را سریع‌تر، ایمن‌تر و با کنترل بیشتری انجام می‌دهند.

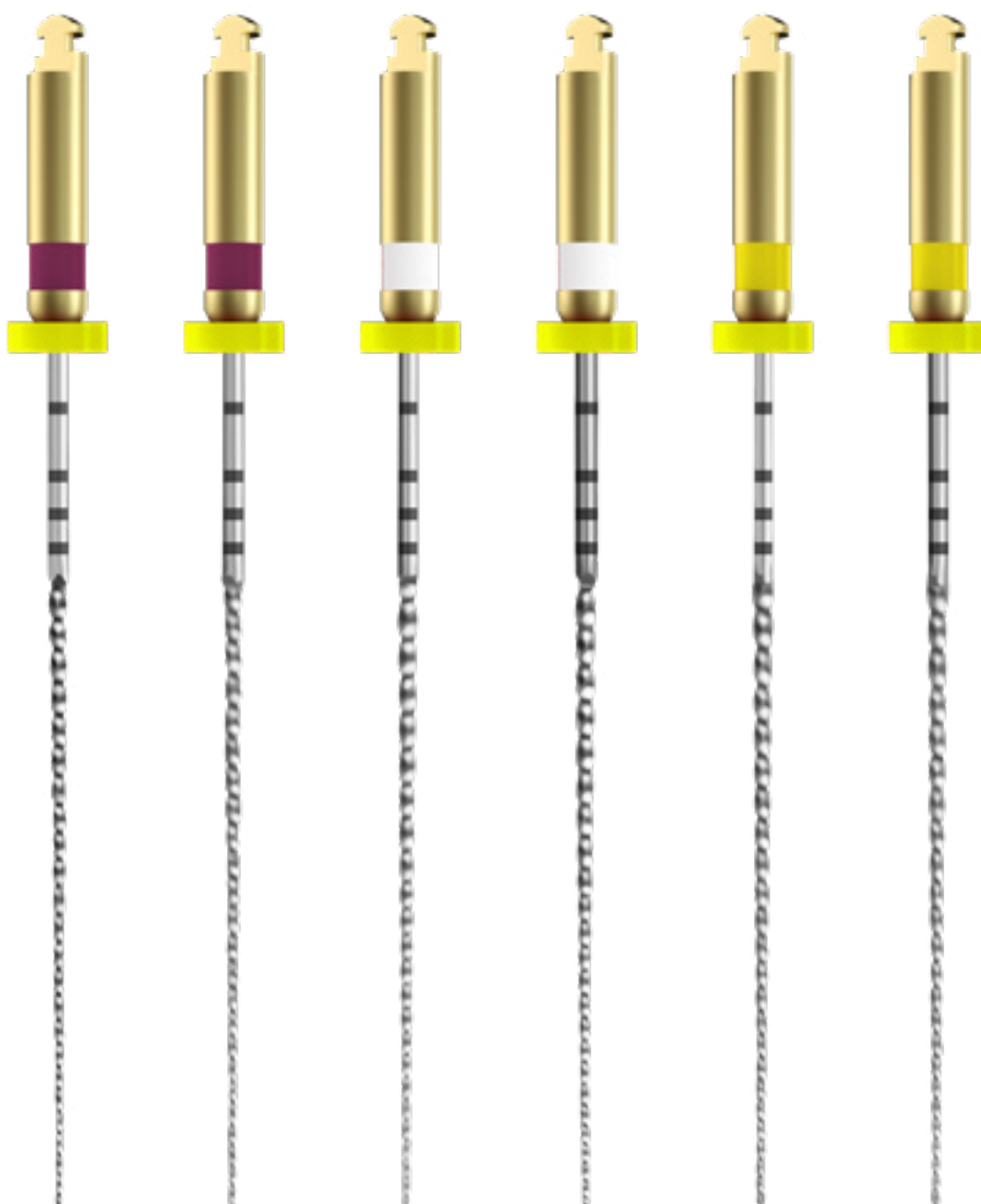



Rotary / PA-FILES

مزایا و کاربرد کلینیکی:

آماده‌سازی اولیه کانال: طراحی اختصاصی برای تسهیل و تسریع ایجاد مسیر اولیه در کانال‌های ریشه.
کنترل مناسب: آماده‌سازی اولیه کانال با دقت و کنترل بیشتر.

ویژگی های طراحی

سطح مقطع: مربعی (Square Cross-section)
تیپر: ثابت 2% (.02)

مشخصات:

سایزها: Assorted و #013، #016، #019
تیپر: .02
طول: 25 میلی‌متر
تعداد در بسته: 6 عدد

تنظیمات پیشنهادی اندو موتور:

سرعت: 300 rpm
گشتاور: 1.5 - 2.5 N.cm

نام محصول	طول (میلی متر)	سایز	تیپر (%)	قطر نوک (میلی متر)	بسته بندی
PA-Files	21/25/31	#013	2	0.13	6pcs/box or blister Single or Assorted
		#016		0.16	
		#019		0.19	





Rotary / D-Files (فایل‌های روتاری درمان مجدد)



ویژگی‌های فنی:

- آلیاژ: این فایل‌ها از آلیاژ نیکل-تیتانیوم (NiTi) ساخته شده‌اند و از انعطاف‌پذیری بالا و مقاومت مناسب در برابر خستگی سیکنی برخوردارند.
- برای خارج‌سازی گوتاپیرکا و سایر مواد پرکننده از کانال ریشه در **درمان مجدد** (Retreatment) طراحی شده‌اند.
- عملکرد مؤثر در برداشت مواد پرکننده و آماده‌سازی مجدد کانال ریشه.

مشخصات:

تیپر / سایز: Assorted و #20/.07 (D3) ، #25/.08 (D2) ، #30/.09 (D1)
طول: 16mm (D1) ، 18mm (D2) ، 22mm (D3)
تعداد در بسته: 6 عدد


تنظیمات پیشنهادی اندو موتور:

سرعت: 150-300 rpm
گشتاور: 2.5 N.cm

بسته بندی	قطر نوک (میلی متر)	تیپر (%)	سایز	طول (میلی متر)
6pcs/box	0.30	9	D1	16
	0.25	8	D2	18
	0.20	7	D3	22



Rotary / Pro-Flexi FILES

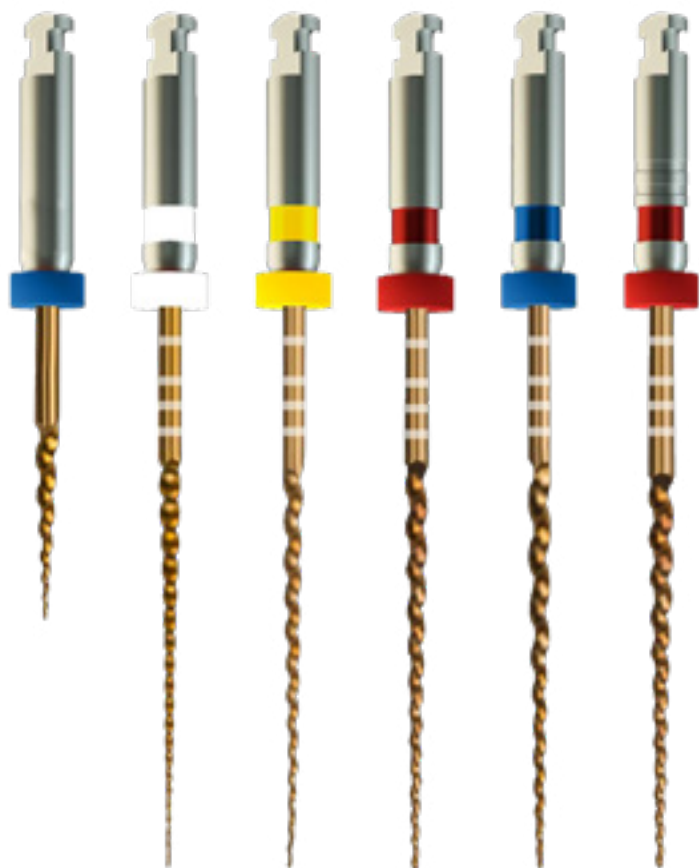

ویژگی‌های فنی:

- **متریال:** این فایل‌ها از آلیاژ نیکل-تیتانیوم (NiTi) با عملیات حرارتی پیشرفته ساخته شده‌اند. این فرآیند علاوه بر ایجاد رنگ طلایی، انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر خستگی سیکلی را افزایش می‌دهد.
- انعطاف‌پذیری بالای این فایل‌ها، آماده‌سازی کانال‌های ریشه با **انحنای متوسط تا شدید** را تسهیل کرده و عبور ایمن از کانال‌های پیچیده را امکان‌پذیر می‌کند.

کاربرد کلینیکی:

شکل‌دهی و آماده‌سازی مرحله‌ای کانال ریشه با حفظ مسیر طبیعی کانال.

ایمنی درمان:

کاهش احتمال جابجایی مسیر کانال (Canal Transportation)، کاهش گیرکردن و شکست فایل در حین درمان.

ویژگی‌های طراحی

- نوک غیر برنده (Non-cutting Tip) باعث هدایت بهتر فایل و کاهش خطر ایجاد لُج و پرفوریشن می‌شود.
- گام و سطح مقطع متغیر (Variable Pitch & Cross Section) باعث افزایش انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر خستگی سیکلی و کاهش احتمال شکست فایل می‌شود.
- سطح مقطع لوزی‌شکل (Diamond-shaped Cross Section) موجب افزایش راندمان برش و بهبود تخلیه دبری‌ها می‌شود.

مشخصات:

سایز/تیپر:

Assorted و #40/.04، #35/.04، #30/.04، #25/.04، #20/.04، #15/.04، #10/.04، #17/.08
Assorted و #35/.06، #30/.06، #25/.06، #20/.06، #15/.06، #10/.06

طول: 25 میلی‌متر

تعداد در بسته: 6 عدد



Rotary / Pro-Flexi FILES

تنظیمات پیشنهادی اندوموتور:

سرعت: 150-300 rpm

گشتاور: 2 - 2.5 N.cm

بسته بندی	گوتا پرکا متناسب	قطر نوک (میلی متر)	تیپر (%)	سطح مقطع	سایز	طول (میلی متر)
6pcs/box or blister Single or Assorted	/	0.25	8		17/08	19
	20/04	0.20	4		20/04	21/25/31
	25/04	0.25	4		25/04	
	30/04	0.30	4		30/04	
	35/04	0.35	4		35/04	
	25/06	0.25	6		25/06	

توالی پیشنهادی استفاده از فایل‌های Pro-Flexi:

- مسیر کانال را با K-File #10 یا #15 بررسی کرده و از باز بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- برای آماده‌سازی اولیه ورودی کانال و ایجاد دسترسی مناسب، از Open File #17/.08 استفاده کنید.
- شکل‌دهی اولیه کانال‌های باریک را با Pro Flexi #20/.04 آغاز کرده و سپس از #25/.04 استفاده کنید.
- تکمیل شکل‌دهی کانال‌های با قطر متوسط در صورت نیاز، از Pro Flexi #30/.04 استفاده کنید.
- برای تکمیل شکل‌دهی کانال‌های عریض، با توجه به آناتومی کانال و نیاز درمان، از Pro Flexi #35/.04 یا #25/.06 استفاده کنید.






Reciprocating System / ONLY ONE FILE

ویژگی‌های فنی:

- آلیاژ: این فایل رسیپروکال از آلیاژ نیکل-تیتانیوم (NiTi) با فناوری عملیات حرارتی ساخته شده است و با برخورداری از مقاومت بالا در برابر خستگی سیکلی، انعطاف‌پذیری بالا و قابلیت پیش خم کردن (Pre-bending)، امکان آماده‌سازی ایمن و مؤثر کانال‌های دارای انحنای شدید را فراهم می‌کند.

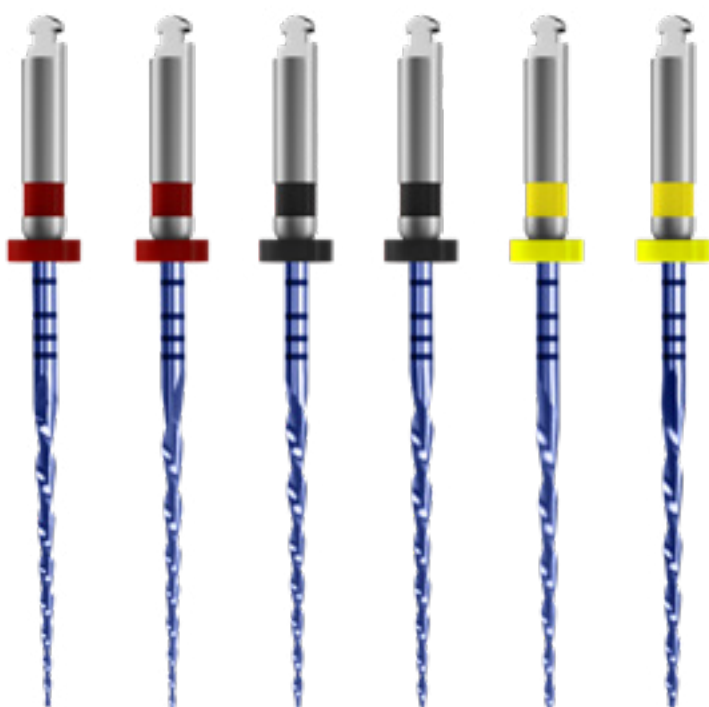

مزایا و کاربرد کلینیکی:

- آماده‌سازی کانال ریشه تنها با یک فایل، بدون نیاز به تعویض مکرر فایل‌ها
- در بسیاری از موارد، بدون نیاز به فایلینگ اولیه با فایل دستی
- کاهش زمان آماده‌سازی کانال در مقایسه با سیستم‌های چندفایلی
- مناسب برای کانال‌های دارای انحنای شدید

مشخصات:

تیپر / سایز:

Assorted و #50/.05 (RECIP) ، #40/.06 (RECIP) ، #25/.08 (RECIP)

طول: 25 میلی‌متر

تعداد در بسته: 6 عدد

ویژگی‌های طراحی:

سطح مقطع: S شکل (S - shaped Cross Section)

پارامترهای حرکت رسیپروکال:

پادساعتگرد: ۱۵۰ درجه

ساعتگرد: ۳۰ درجه

بسته بندی	گوتا پرکا متناسب	قطر نوک (میلی متر)	تیپر (%)	سطح مقطع	سایز	طول (میلی متر)
6pcs/box or blister Single or Assorted	25/08	0.25	8		R25	21/25/31
	40/06	0.40	6		R40	
	50/05	0.50	5		R50	



Manual Files


گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

U File



Manual Files / U File

U File دنکو یک ابزار اولتراسونیک اندودانتیکس است که برای استفاده همراه با دستگاه‌های اولتراسونیک، به منظور شستشو و پاکسازی سیستم کانال ریشه طراحی شده است. ارتعاشات اولتراسونیک ایجاد شده توسط این ابزار، به بهبود جریان محلول‌های شستشو، افزایش کارایی پاکسازی کانال و حذف مؤثرتر دبری‌ها و بقایای داخل کانال ریشه کمک می‌کند.

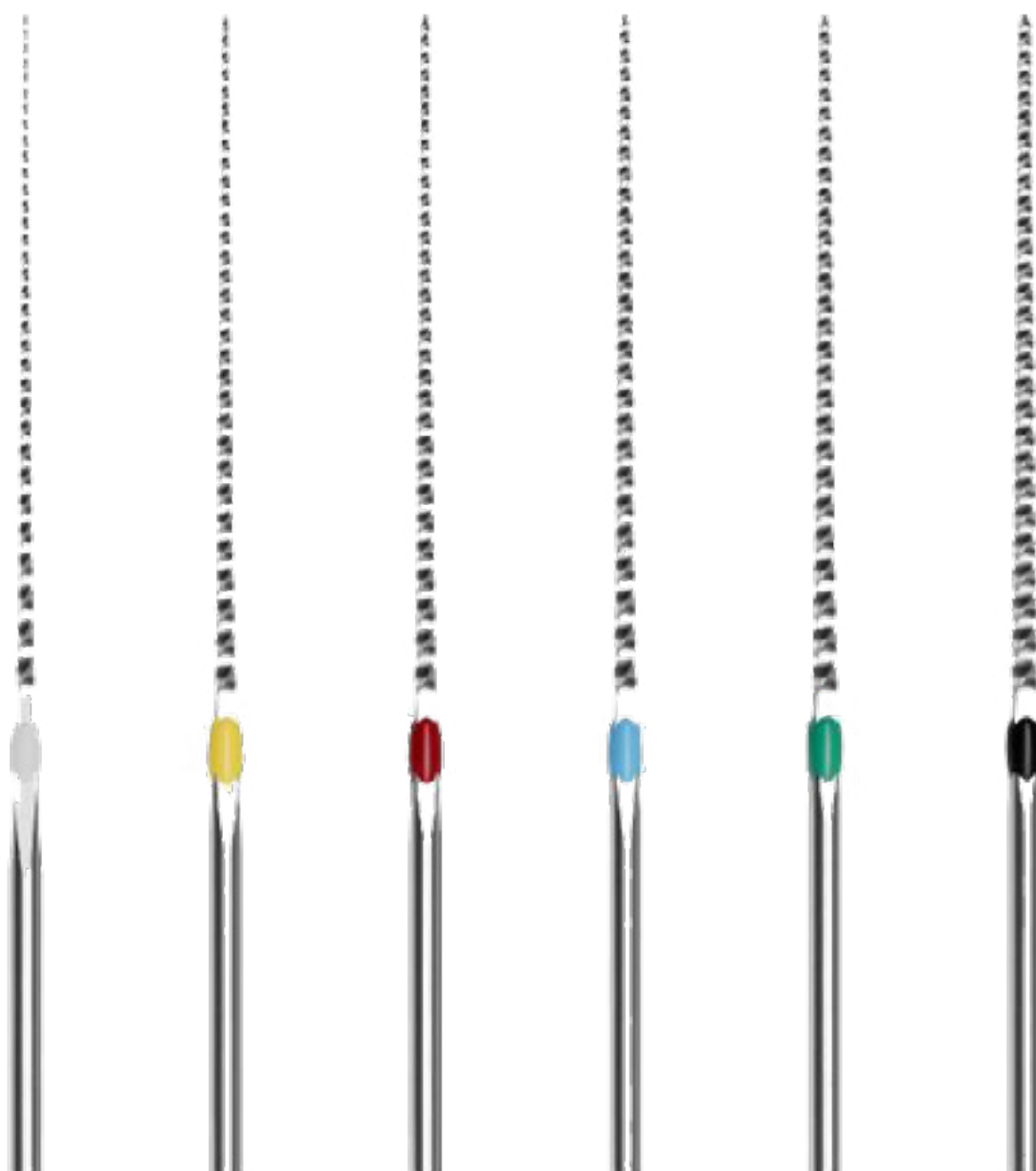

ویژگی‌های محصول:

- ساخته شده از استنلس استیل (Stainless Steel) با استحکام و دوام بالا.
- مناسب برای شستشو و پاکسازی مؤثر سیستم کانال ریشه.
- طول ابزار: ۳۳ میلی‌متر
- سایزبندی: #15، #20، #25 و Assort (#15-40)
- بسته‌بندی: ۶ عددی (تکی و آسورت)



File Holder & Plugger

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

Smart File Holder

Gutta Percha Plugger
(قلم پلاگر گوتاپرکا)

Micro Opener



File Holder & Plugger / Gutta Percha Plugger (قلم پلاگر گوتاپرکا)

قلم پلاگر گوتاپرکا دنکو ابزاری تخصصی برای تراکم و فشرده‌سازی گوتاپرکا در مراحل پرکردگی کانال ریشه است. این ابزار با طراحی دو سر و بهره‌گیری از سری‌های نیکل-تیتانیوم (NiTi) و استیل ضدزنگ (Stainless Steel)، امکان اعمال فشار کنترل‌شده و تراکم یکنواخت گوتاپرکا را در بخش‌های مختلف کانال ریشه فراهم می‌کند. ترکیب انعطاف‌پذیری سری NiTi و استحکام سری Stainless Steel، کنترل بهتر ابزار و تطبیق مناسب با شرایط مختلف کانال ریشه را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌های محصول:

- مناسب برای تراکم و فشرده‌سازی گوتاپرکا در درمان ریشه
- طراحی دو سر با دو سایز متفاوت؛ شامل یک سر نیکل-تیتانیوم (NiTi) با انعطاف‌پذیری بالا و خاصیت بازگشت‌پذیری مناسب، برای کانال‌های دارای انحنا و نواحی با دسترسی دشوار، و یک سر استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با استحکام و سختی بالا، مناسب برای اعمال فشار بیشتر هنگام تراکم گوتاپرکا و استفاده در بخش‌های کرونالی و میانی کانال ریشه.
- قابلیت پری‌بندینگ (Pre-bending) نوک ابزار تا زاویه ۹۰ درجه جهت تنظیم زاویه دسترسی و سهولت کار در کانال‌های دشوار
- کدگذاری رنگی برای تشخیص سریع سایزها
- **سایزبندی**
 - ◀ سبز: SS #70 / NiTi #35
 - ◀ مشکی: SS #80 / NiTi #40
 - ◀ طلایی: SS #100 / NiTi #50
 - ◀ آبی: SS #120 / NiTi #60
- **بسته‌بندی**
 - ◀ تک عددی
 - ◀ پک ۴ عددی (شامل چهار سایز موجود)






File Holder & Plugger / Smart File Holder

ویژگی‌های محصول:

- قابلیت تنظیم، فیکس کردن و نگهداری فایل دستی جهت کنترل بهتر و هدایت دقیق‌تر فایل حین درمان.
- ساخته‌شده از استنلس استیل پزشکی
- بدنه فلزی رسانا با قابلیت استفاده همراه با اپکس لوکیتور، امکان کنترل موقعیت فایل داخل کانال و بررسی نزدیکی آن به ناحیه اپیکال را فراهم می‌کند؛ این قابلیت به ارزیابی مسیر کانال و کاهش ریسک آسیب به ناحیه اپیکال و ایجاد پرفوریشن در حین درمان کمک می‌کند، به‌ویژه در دندان‌های خلفی با دسترسی محدود.
- ابزاری کاربردی برای بررسی کانال، کمک به تعیین طول کارکرد کانال ریشه، هدایت فایل و تسهیل فرآیند پاکسازی کانال.
- طراحی باریک و ارگونومیک برای افزایش کنترل و دید حین درمان.
- قابلیت جداسازی قطعات، استریل در اتوکلاو و استفاده مجدد.

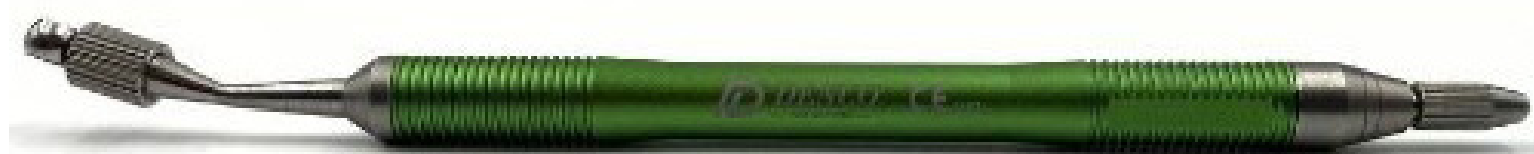



File Holder & Plugger / Micro Opener

ویژگی‌های محصول:

- مناسب برای یافتن ورودی کانال‌های ریشه و کاوش مسیر کانال جهت ارزیابی اولیه و هدایت دقیق‌تر ابزار در درمان اندودانتیک.
- طراحی باریک و ارگونومیک برای افزایش دید و دسترسی هنگام کار تحت لوپ و میکروسکوپ.
- طراحی‌شده برای استفاده و تعویض آسان فایل‌های دستی اندودانتیک و فایل‌های مخصوص استفاده زیر میکروسکوپ در یک ابزار واحد.
- قابل استفاده با فایل‌های دستی K-File، H-File، C-File، اسپریدرها و پلاگرهای دستی.
- بدنه ۱۰۰٪ فلزی با طراحی مقاوم و مناسب برای استفاده‌های تخصصی اندودانتیک.
- قابلیت Pre-bending (خم شدن) تا حدود ۴۵ درجه برای دسترسی بهتر به کانال‌های دندان‌های خلفی و نواحی با دسترسی محدود.





گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

Endomotor

Intraoral Scanner

Ultrasonic

Apex Locator

RVG

Obturator

Motor Surgery

Light Cure



Intraoral Scanner

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

Helios 680

Helios 700

Helios 500



Intraoral Scanner / Helios 700

Helios 700 مدل بی‌سیم و پیشرفته خانواده Helios است که برای کلینیک‌های مدرن، پرتردد و کاملاً دیجیتال طراحی شده است. این دستگاه با اتصال بی‌سیم اختصاصی، آزادی عمل بیشتری در حین کار ایجاد می‌کند و در کنار دقت بالا و امکانات نرم افزاری کامل، تجربه‌ای حرفه‌ای از اسکن داخل دهانی ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی | Technical Specifications

- وزن: 225 گرم
- دقت: تک دندان 8 میکرون / فول آرچ 16 میکرون
- نوع اتصال: وای‌فای اختصاصی
- برد بی‌سیم: تا 6 متر
- باتری: 2 × 3300 میلی‌آمپر ساعت
- مدت زمان کارکرد: تا 100 دقیقه
- فرمت خروجی: STL / PLY / OBJ
- کالیبراسیون: کالیبراسیون خودکار

تیپ‌ها و ابعاد | Scan Tips & Dimensions

- این اسکنر داخل دهانی همراه با ۴ عدد سری (Tip) ارائه می‌شود.
- سایز بزرگ (L)
- ابعاد تیپ: 16 × 14 میلی‌متر
- برای پوشش‌دهی وسیع‌تر و سرعت بالاتر در فرآیند اسکن.





Intraoral Scanner / Helios 700

قابلیت‌های نرم‌افزاری | Software Features

- **ثبت بایت خودکار / دستی | Auto / Manual Bite**
امکان ثبت بایت و تطابق فک‌ها به صورت خودکار یا دستی برای افزایش دقت در روابط اکلوزالی.
- **ورک فلو بهینه شده ایمپلنت | Enhanced Implant Workflow**
فرآیند اسکن در درمان‌های ایمپلنت را دقیق‌تر و سریع‌تر می‌کند.
- **حالت اسکن سطوح براق | Shining Mode**
برای ثبت بهتر نواحی براق و بازتابنده طراحی شده است.
- **تحلیل اکلوزال | Occlusion Analysis**
به ارزیابی تماس‌ها و روابط اکلوزالی کمک می‌کند.
- **تشخیص آندرکات | Undercut Detection**
نواحی آندرکات را برای بررسی دقیق‌تر درمان شناسایی می‌کند.
- **نگاشت بافت سطحی | Texture Mapping**
نمایش طبیعی‌تر جزئیات سطحی دندان و بافت‌های اطراف.
- **اندازه‌گیری ساختارهای دندانی | Tooth Measurement**
امکان اندازه‌گیری ابعاد و فواصل دندانی در نرم‌افزار.
- **ترسیم خط مارجین | Margin Line Drawing**
مناسب برای تعیین دقیق خط مارجین در درمان‌های پروتزی و ترمیمی.
- **دوربین داخل دهانی | Intraoral Camera**
امکان مشاهده بهتر و مستند سازی محیط داخل دهان.
- **به‌روزرسانی نرم‌افزاری | Software Update**
دسترسی به بهبودها و امکانات جدید نرم‌افزاری.
- **حذف هوشمند بافت نرم | Auto AI**
حذف هوشمند بافت‌های اضافی مانند لب، گونه و زبان از ناحیه اسکن.
- **جا به جایی فک بالا و پایین | Swap Upper and Lower Jaw**
تغییر سریع موقعیت فک بالا و پایین در محیط نرم‌افزار.
- **کالیبراسیون اتوماتیک | Automatic Calibration**
تنظیم خودکار دستگاه برای حفظ دقت اسکن.
- **تیپ‌های قابل اتوکلاو | Autoclavable Tips**
برای تعداد دقیق سیکل‌های اتوکلاو، ثبت نهایی مشخصات باید مطابق آخرین دستورالعمل رسمی سازنده انجام شود.

کاربرد

مناسب برای کلینیک‌های پیشرفته‌ای که به دنبال یک اسکنر بی‌سیم، دقیق و حرفه‌ای برای درمان‌های دیجیتال و ایمپلنت هستند.





Intraoral Scanner / Helios 680

Helios 680 یک اسکنر داخل دهانی پیشرفته است که برای کلینیک‌هایی با نیاز به دقت بالاتر، سرعت بیشتر و عملکرد حرفه‌ای‌تر طراحی شده است. طراحی سبک و ارگونومیک این مدل در کنار اسکن رنگی و نرخ فریم مناسب، آن را به گزینه‌ای قدرتمند برای درمان‌های دیجیتال روزمره و پیشرفته تبدیل می‌کند.

مشخصات فنی | Technical Specifications

- وزن: 161.5 گرم
- دقت: 8 میکرون تک دندان / 16 میکرون فک کامل
- FPS (سرعت تصویربرداری): ۳۰ فریم در ثانیه
- حالت اسکن: اسکن رنگی
- فرمت خروجی: STL / PLY / OBJ
- کالیبراسیون: کالیبراسیون خودکار

تیپ‌ها و ابعاد | Scan Tips & Dimensions

- این اسکنر داخل دهانی همراه با ۴ عدد سری (Tip) ارائه می‌شود.
- سایز بزرگ (L)
- ابعاد تیپ: 14 × 16 میلی‌متر
- برای پوشش‌دهی وسیع تر و سرعت بالاتر در فرآیند اسکن.





Intraoral Scanner / Helios 680

قابلیت‌های نرم‌افزاری | Software Features

- **ثبت بایت خودکار / دستی | Auto / Manual Bite**
امکان ثبت بایت و تطابق فک‌ها به صورت خودکار یا دستی برای افزایش دقت در روابط اکلوزالی.
- **ورک فلو بهینه شده ایمپلنت | Enhanced Implant Workflow**
فرآیند اسکن در درمان‌های ایمپلنت را دقیق‌تر و سریع‌تر می‌کند.
- **حالت اسکن سطوح براق | Shining Mode**
برای ثبت بهتر نواحی براق و بازتابنده طراحی شده است.
- **تحلیل اکلوزال | Occlusion Analysis**
به ارزیابی تماس‌ها و روابط اکلوزالی کمک می‌کند.
- **تشخیص آندرکات | Undercut Detection**
نواحی آندرکات را برای بررسی دقیق‌تر درمان شناسایی می‌کند.
- **نگاشت بافت سطحی | Texture Mapping**
نمایش طبیعی‌تر جزئیات سطحی دندان و بافت‌های اطراف.
- **اندازه‌گیری ساختارهای دندانی | Tooth Measurement**
امکان اندازه‌گیری ابعاد و فواصل دندانی در نرم‌افزار.
- **ترسیم خط مارجین | Margin Line Drawing**
مناسب برای تعیین دقیق خط مارجین در درمان‌های پروتزی و ترمیمی.
- **دوربین داخل دهانی | Intraoral Camera**
امکان مشاهده بهتر و مستند سازی محیط داخل دهان.
- **به‌روزرسانی نرم‌افزاری | Software Update**
دسترسی به بهبودها و امکانات جدید نرم‌افزاری.
- **حذف هوشمند بافت نرم | Auto AI**
حذف هوشمند بافت‌های اضافی مانند لب، گونه و زبان از ناحیه اسکن.
- **جا به جایی فک بالا و پایین | Swap Upper and Lower Jaw**
تغییر سریع موقعیت فک بالا و پایین در محیط نرم‌افزار.
- **کالیبراسیون اتوماتیک | Automatic Calibration**
تنظیم خودکار دستگاه برای حفظ دقت اسکن.

کاربرد

مناسب برای کلینیک‌هایی که به دنبال **اسکنری سبک، سریع، دقیق و حرفه‌ای** برای توسعه درمان‌های دیجیتال پیشرفته هستند.





Intraoral Scanner / Helios 500

Helios 500 یک اسکنر داخل دهانی اقتصادی و کاربردی است که برای کلینیک‌هایی طراحی شده که به دنبال ورود مطمئن و حرفه‌ای به دندانپزشکی دیجیتال هستند. این مدل با وزن مناسب، کاربری ساده و دقت قابل اتکا، راهکاری مؤثر برای استفاده روزمره در اسکن‌های داخل دهانی ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی | Technical Specifications

- وزن: 185 گرم
- دقت: تک دندان 10 میکرون / فول آرچ 20 میکرون
- فرمت خروجی: STL / PLY / OBJ
- کالیبراسیون: کالیبراسیون خودکار

تیپ‌ها و ابعاد | Scan Tips & Dimensions

این مدل با دو سایز تیپ ارائه می‌شود:

- کوچک (S)
ابعاد تیپ: 18.6 × 16.7 میلی‌متر
ناحیه اسکن: 12 × 12 میلی‌متر
- بزرگ (L)
ابعاد تیپ: 22 × 18 میلی‌متر
ناحیه اسکن: 16 × 14 میلی‌متر





Intraoral Scanner / Helios 500

قابلیت‌های نرم‌افزاری | Software Features

- **ثبت بایت خودکار / دستی | Auto / Manual Bite**
امکان ثبت بایت و تطابق فک‌ها به صورت خودکار یا دستی برای افزایش دقت در روابط اکلوزالی.
- **ورک فلو بهینه شده ایمپلنت | Enhanced Implant Workflow**
فرآیند اسکن در درمان‌های ایمپلنت را دقیق‌تر و سریع‌تر می‌کند.
- **حالت اسکن سطوح براق | Shining Mode**
برای ثبت بهتر نواحی براق و بازتابنده طراحی شده است.
- **تحلیل اکلوزال | Occlusion Analysis**
به ارزیابی تماس‌ها و روابط اکلوزالی کمک می‌کند.
- **تشخیص آندرکات | Undercut Detection**
نواحی آندرکات را برای بررسی دقیق‌تر درمان شناسایی می‌کند.
- **نگاشت بافت سطحی | Texture Mapping**
نمایش طبیعی‌تر جزئیات سطحی دندان و بافت‌های اطراف.
- **اندازه‌گیری ساختارهای دندانی | Tooth Measurement**
امکان اندازه‌گیری ابعاد و فواصل دندانی در نرم‌افزار.
- **ترسیم خط مارجین | Margin Line Drawing**
مناسب برای تعیین دقیق خط مارجین در درمان‌های پروتزی و ترمیمی.
- **دوربین داخل دهانی | Intraoral Camera**
امکان مشاهده بهتر و مستند سازی محیط داخل دهان.
- **به‌روزرسانی نرم‌افزاری | Software Update**
دسترسی به بهبودها و امکانات جدید نرم‌افزاری.
- **حذف هوشمند بافت نرم | Auto AI**
حذف هوشمند بافت‌های اضافی مانند لب، گونه و زبان از ناحیه اسکن.
- **جا به جایی فک بالا و پایین | Swap Upper and Lower Jaw**
تغییر سریع موقعیت فک بالا و پایین در محیط نرم‌افزار.
- **کالیبراسیون اتوماتیک | Automatic Calibration**
تنظیم خودکار دستگاه برای حفظ دقت اسکن.

کاربرد

مناسب برای کلینیک‌هایی که به دنبال یک **راهکار اقتصادی، دقیق و مطمئن** برای شروع یا توسعه ورک فلو دیجیتال خود هستند.





Endomotor

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

E-Connect Pro

E-Connect S

E-Value

E-Connect SE

E-xtreme



Endomotor / E-Connect S



ویژگی‌های فنی E-Connect S

1. موتور براشلس (Brushless Motor)

طول عمر بیشتر، صدای کمتر و کنترل دقیق‌تر سرعت و گشتاور.

2. آنگل ۱:۱

3. قابلیت چرخش 360 درجه آنگل

بهبود دسترسی به تمامی نواحی دهان و افزایش ارگونومی حین درمان.

4. سرعت قابل تنظیم: 120-1000 rpm

5. گشتاور قابل تنظیم: 0.5-4 N.cm

6. تنظیمات از پیش تعریف‌شده برای سیستم‌های روتاری

7. حالت‌های حرکتی: FWD، REV، REC و ATC

- FWD: چرخش ساعتگرد

- REV: چرخش پادساعتگرد

- REC: حرکت رفت و برگشتی (رسیپروکال)

- ATC: کنترل تطبیقی گشتاور

نکته: در حالت ATC با رسیدن گشتاور به حد تنظیم‌شده، موتور بر اساس زاویه‌های تنظیم‌شده به صورت خودکار وارد حالت حرکت رسیپروکال می‌شود تا ایمنی و کارایی آماده‌سازی کانال ریشه افزایش یابد.

8. 11 حافظه داخلی (M0 تا M10)

امکان ذخیره و فراخوانی سریع تنظیمات اختصاصی.

9. اپکس لوکیتور داخلی

تعیین دقیق طول کار به صورت هم‌زمان با آماده‌سازی کانال.

عملکردهای هوشمند اپکس لوکیتور

- Auto Start & Stop: شروع و توقف خودکار چرخش موتور با ورود و خروج فایل از کانال.

- Apical Reverse: با رسیدن فایل به اپکس، چرخش موتور به صورت خودکار معکوس می‌شود تا از عبور فایل از اپکس جلوگیری شود.

- Apical Slow Down: با نزدیک شدن فایل به اپکس، سرعت چرخش موتور به صورت خودکار کاهش می‌یابد تا کنترل بیشتری در ناحیه اپیکال فراهم شود.

10. نمایشگر OLED

نمایش واضح تنظیمات و اطلاعات دستگاه.

11. نمایشگر قابل چرخش

امکان تنظیم جهت نمایشگر برای استفاده آسان کاربران راست‌دست و چپ‌دست.

12. باتری لیتیومی با ظرفیت ۱۵۰۰ mAh



Endomotor / E-Connect Pro



ویژگی‌های فنی E-Connect Pro

1. موتور براشلس (Brushless Motor)

طول عمر بیشتر، صدای کمتر و کنترل دقیق‌تر سرعت و گشتاور.

2. آنگل ۱:۱

3. قابلیت چرخش 360 درجه آنگل

4. آنگل با هد سوپر مینی

5. سرعت قابل تنظیم: 120-1000 rpm

6. گشتاور قابل تنظیم: 0.5-4 N.cm

7. تنظیمات از پیش تعریف‌شده برای سیستم‌های روتاری

8. حالت‌های حرکتی: REC، REV، FWD

• FWD: چرخش ساعتگرد

• REV: چرخش پادساعتگرد

• REC: حرکت رفت و برگشتی (رسیپروکال)

نکته: برنامه M0: مخصوص حرکت رسیپروکال (Reciprocation).

۴ حالت رسیپروکال مستقیم: مناسب برای استفاده از فایل های روتاری در حالت رسیپروکال

(چرخش رفت در جهت ساعتگرد و چرخش برگشت در جهت پادساعتگرد)

• ۱۵۰° ساعتگرد / ۳۰° پادساعتگرد

• ۱۸۰° ساعتگرد / ۳۰° پادساعتگرد

• ۲۱۰° ساعتگرد / ۳۰° پادساعتگرد

• ۲۵۰° ساعتگرد / ۳۰° پادساعتگرد

۱ حالت رسیپروکال معکوس: مناسب برای فایل های رسیپروکال

(چرخش رفت در جهت پادساعتگرد و چرخش برگشت در جهت ساعتگرد)

• ۱۵۰° پادساعتگرد / ۳۰° ساعتگرد





Endomotor / E-Connect Pro

9. 10 حافظه داخلی (M0 تا M9)

10. نمایشگر OLED

نمایش واضح تنظیمات و اطلاعات دستگاه.

11. نمایشگر قابل چرخش

امکان تنظیم جهت نمایشگر برای استفاده آسان کاربران راست‌دست و چپ‌دست.

12. باتری لیتیومی با ظرفیت ۱۵۰۰ mAh

13. قابلیت اتصال و عملکرد یکپارچه با اپکس لوکیتور E-PEX، پشتیبانی از قابلیت Mir-

ror Display؛ نمایش همزمان اطلاعات اپکس لوکیتور روی نمایشگر اندوموتور.

عملکردهای هوشمند هنگام اتصال به اپکس لوکیتور E-PEX

- **Auto Start & Stop:** شروع و توقف خودکار چرخش موتور با ورود و خروج فایل از کانال.
- **Apical Reverse:** با رسیدن فایل به اپکس، چرخش موتور به صورت خودکار معکوس می‌شود تا از عبور فایل از اپکس جلوگیری شود.
- **Apical Slow Down:** با نزدیک شدن فایل به اپکس، سرعت چرخش موتور به صورت خودکار کاهش می‌یابد تا کنترل بیشتری در ناحیه اپیکال فراهم شود.





Endomotor / E-Connect SE



ویژگی‌های فنی E-Connect SE

1. موتور براشلس (Brushless Motor)

طول عمر بیشتر، صدای کمتر و کنترل دقیق‌تر سرعت و گشتاور.

2. آنگل ۱:۱

3. قابلیت چرخش 360 درجه آنگل

بهبود دسترسی به تمامی نواحی دهان و افزایش ارگونومی حین درمان.

4. سرعت قابل تنظیم: 120-1000 rpm

5. گشتاور قابل تنظیم: 0.5-5 N.cm

6. تنظیمات از پیش تعریف‌شده برای سیستم‌های روتاری

7. حالت‌های حرکتی: FWD، REV، REC و ATC

- FWD: چرخش ساعتگرد

- REV: چرخش پادساعتگرد

- REC: حرکت رفت و برگشتی (رسیپروکال)

قابلیت تنظیم مستقل زاویه‌های چرخش رسیپروکال: زاویه‌های چرخش ساعتگرد و پادساعتگرد، هر کدام از ۳۰ تا ۳۷۰ درجه قابل تنظیم هستند.

نکته: مجموع زاویه‌های چرخش ساعتگرد و پادساعتگرد باید بیش از ۱۲۰ درجه باشد.

- ATC: کنترل تطبیقی گشتاور

نکته: در حالت ATC با رسیدن گشتاور به حد تنظیم‌شده، موتور بر اساس زاویه‌های تنظیم‌شده به صورت خودکار وارد حالت حرکت رسیپروکال می‌شود تا ایمنی و کارایی آماده‌سازی کانال ریشه افزایش یابد.

8. حافظه داخلی (M0 تا M9)

امکان ذخیره و فراخوانی سریع تنظیمات اختصاصی.

9. نمایشگر دیجیتال OLED

نمایش واضح تنظیمات و اطلاعات دستگاه.

10. نمایشگر قابل چرخش

امکان تنظیم جهت نمایشگر برای استفاده آسان کاربران راست‌دست و چپ‌دست.

11. باتری لیتیومی با ظرفیت 1400 mAh

12. قابلیت اتصال و عملکرد یکپارچه با اپکس لوکیتور E-PEX، پشتیبانی از قابلیت Mir-

ror Display؛ نمایش همزمان اطلاعات اپکس لوکیتور روی نمایشگر اندوموتور.

عملکردهای هوشمند هنگام اتصال به اپکس لوکیتور E-PEX

- Auto Start & Stop: شروع و توقف خودکار چرخش موتور با ورود و خروج فایل از کانال.
- Auto Apical Reverse/Stop: با نزدیک شدن فایل به ناحیه اپیکال، موتور مطابق تنظیمات دستگاه به طور خودکار جهت چرخش را معکوس کرده یا متوقف می‌شود.
- Auto Apical Slow Down: با نزدیک شدن فایل به ناحیه اپیکال، سرعت چرخش موتور به صورت خودکار کاهش می‌یابد تا کنترل بیشتری هنگام آماده‌سازی کانال فراهم شود.



Endomotor / E-Value



ویژگی‌های فنی E-Value

1. موتور براشلس (Brushless Motor)
طول عمر بیشتر، صدای کمتر و کنترل دقیق‌تر سرعت و گشتاور.
2. آنگل ۱:۱
3. قابلیت چرخش 360 درجه آنگل
بهبود دسترسی به تمامی نواحی دهان و افزایش ارگونومی حین درمان.
4. سرعت قابل تنظیم: 120-1000 rpm
5. گشتاور قابل تنظیم: 0.5-4 N.cm
6. تنظیمات از پیش تعریف‌شده برای سیستم‌های روتاری
7. حالت‌های حرکتی: FWD، REV، REC و ATC
 - FWD: چرخش ساعتگرد
 - REV: چرخش پادساعتگرد
 - REC: حرکت رفت و برگشتی (رسیپروکال)
 - ◀ قابلیت تنظیم زاویه حرکت رسیپروکال از ۳۰ تا ۳۷۰ درجه
 - ◀ قابلیت تنظیم سطح سرعت حرکت رسیپروکال در ۵ سطح
 - ATC: کنترل تطبیقی گشتاور

نکته: در حالت ATC با رسیدن گشتاور به حد تنظیم‌شده، موتور بر اساس زاویه‌های تنظیم‌شده به صورت خودکار وارد حالت حرکت رسیپروکال می‌شود تا ایمنی و کارایی آماده‌سازی کانال ریشه افزایش یابد.
8. 10 حافظه داخلی (M1 تا M10)
امکان ذخیره و فراخوانی سریع تنظیمات اختصاصی.
9. نمایشگر رنگی OLED
نمایش واضح تنظیمات و اطلاعات دستگاه.
10. نمایشگر قابل چرخش
امکان تنظیم جهت نمایشگر برای استفاده آسان کاربران راست‌دست و چپ‌دست.
11. باتری لیتیومی با ظرفیت 1900 mAh



Endomotor / E-xtreme

ویژگی‌های فنی E-xtreme

1. موتور براشلس (Brushless Motor)

طول عمر بیشتر، صدای کمتر و کنترل دقیق‌تر سرعت و گشتاور.

2. آنگل ۱:۱

3. قابلیت چرخش 360 درجه آنگل

بهبود دسترسی به تمامی نواحی دهان و افزایش ارگونومی حین درمان.

4. آنگل با هد سوپر مینی

میدان دید وسیع‌تر و دسترسی بهتر به نواحی خلفی دهان برای انجام درمانی دقیق‌تر.

5. وزن سبک، تنها 99 گرم

طراحی سبک و ارگونومیک دستگاه، خستگی دست را در طول درمان به حداقل رسانده و کنترل بیشتر، دقت بالاتر و راحتی مطلوب را برای پزشک فراهم می‌کند.

6. سرعت قابل تنظیم: 120-650 rpm

7. گشتاور قابل تنظیم: 0.5-4 N.cm

8. تنظیمات از پیش تعریف‌شده برای سیستم‌های روتاری

9. حالت‌های حرکتی: REC، REV، FWD

• FWD: چرخش ساعتگرد

• REV: چرخش پادساعتگرد

• REC: حرکت رفت و برگشتی (رسیپروکال)

نکته: دارای 5 برنامه رسیپروکال با 5 زاویه پیش فرض:
150°/30°، 30°/150°، 30°/180°، 30°/210° و 30°/250°.

10. حافظه داخلی (M0 تا M9)

امکان ذخیره و فراخوانی سریع تنظیمات اختصاصی.

نکته: برنامه M0: مخصوص حرکت رسیپروکال (Reciprocation).

11. باتری لیتیومی با ظرفیت 800 mAh





Apex Locator

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

FindPex

E-Pex



ویژگی‌های فنی اپکس لوکیتور E-PEX

1. فناوری پیشرفته چندفرکانسی

استفاده هم‌زمان از چندین فرکانس برای تحلیل دقیق‌تر کانال ریشه، افزایش دقت تعیین طول کاری و حفظ عملکرد پایدار در شرایط مختلف کانال.

2. دقت بالا در اندازه‌گیری کانال‌های خشک و مرطوب

3. نمایشگر بزرگ LCD با اندازه 3/5 اینچ

4. کالیبراسیون خودکار

5. طراحی با ابعاد کوچک و ارگونومیک

6. باتری لیتیومی قدرتمند با ظرفیت 1500 میلی‌آمپر ساعت

7. اپکس لوکیتور E-Pex قابلیت اتصال به اندوموتورهای سازگار Eighteeth، مدل‌های

E-Connect و E-Connect SE را دارد و با بهره‌گیری هم‌زمان از قابلیت‌های هر دو دستگاه،

سه عملکرد هوشمند زیر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد:

- **Auto Start & Stop:** شروع و توقف خودکار چرخش موتور با ورود و خروج فایل از کانال
- **Apical Reverse:** با نزدیک شدن فایل به ناحیه اپیکال، موتور مطابق تنظیمات دستگاه به طور خودکار جهت چرخش را معکوس می‌کند.
- **Apical Slow Down:** با نزدیک شدن فایل به ناحیه اپیکال، سرعت چرخش موتور به صورت خودکار کاهش می‌یابد تا کنترل بیشتری هنگام آماده‌سازی کانال فراهم شود.

8. تستر E-PEX

تستر اختصاصی E-PEX امکان بررسی سریع عملکرد اپکس لوکیتور را فراهم می‌کند. پس از اتصال تستر، نمایش اعداد 02، 03 یا 04 بیانگر عملکرد صحیح و سلامت دستگاه است.

9. لوازم جانبی مقاوم

قلاب لب از استیل ضدزنگ L316 و گیره فایل با روکش سیلیکونی زیست‌سازگار، طراحی‌شده برای دوام بیشتر و عملکردی مطمئن.



Apex Locator / FindPex



ویژگی‌های فنی اپکس لوکیتور FindPex

1. فناوری ASW (Adaptive Sine Wave)

این فناوری با کاهش تداخلات الکتریکی و نوسانات اندازه‌گیری، دقت تعیین طول کاری کانال را افزایش می‌دهد.

2. فناوری پیشرفته چندفرکانسی

استفاده هم‌زمان از چندین فرکانس برای تحلیل دقیق‌تر کانال ریشه، افزایش دقت تعیین طول کاری و حفظ عملکرد پایدار در شرایط مختلف کانال.

3. پردازنده پرسرعت با پاسخ‌دهی لحظه‌ای (Real-Time Response)

پردازش سریع داده‌ها برای پاسخ‌دهی لحظه‌ای و نمایش پایدار موقعیت فایل.

4. سه سطح قابل تنظیم حساسیت اندازه‌گیری

امکان انتخاب سه سطح حساسیت (کم، متوسط و زیاد) متناسب با شرایط مختلف کانال ریشه و ترجیح کاربر.

5. کاربری آسان

- نمایش لحظه‌ای موقعیت فایل: نمایش پیوسته موقعیت فایل داخل کانال ریشه برای کنترل بهتر حین درمان.
- تشخیص هوشمند وضعیت داخل و خارج دهان: دستگاه به صورت خودکار شرایط کاری را تشخیص می‌دهد؛ در خارج از دهان وضعیت Connected و با ورود فایل به کانال ریشه، موقعیت فایل به صورت عددی و لحظه‌ای روی نمایشگر نمایش داده می‌شود.





6. امکانات شخصی سازی

- شخصی سازی پس زمینه نمایشگر: امکان انتخاب تصویر پس زمینه مطابق با ترجیح کاربر.
- تنظیمات صوتی: امکان تنظیم صداهای دستگاه.
- تنظیمات پیشرفته: قابلیت تنظیم زمان خاموشی خودکار، بازگشت خودکار به صفحه اصلی، زبان دستگاه و میزان صدا.
- تنظیم روشنایی نمایشگر: امکان تنظیم روشنایی صفحه برای مشاهده بهتر اطلاعات.
- رابط کاربری با تم روشن و تیره: امکان انتخاب حالت نمایش روشن یا تیره متناسب با شرایط کاری و سلیقه کاربر.

7. نمایشگر رنگی ۳.۵ اینچی TFT با فناوری IPS

نمایش واضح و خوانای اطلاعات از تمامی زوایا.

8. باتری لیتیومی با ظرفیت ۸۰۰ میلی آمپر ساعت

9. تستر FindPex

تستر اختصاصی FindPex امکان بررسی سریع عملکرد اپکس لوکیتور را فراهم می کند. پس از اتصال تستر، نمایش اعداد 02، 03 یا 04 بیانگر عملکرد صحیح و سلامت دستگاه است.

10. لوازم جانبی مقاوم

قلاّب لب از استیل ضد زنگ L 316 و گیره فایل با روکش سیلیکونی زیست سازگار، طراحی شده برای دوام بیشتر و عملکردی مطمئن.





Ultrasonic

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

UltraMint Pro

Ultra X

Surfy One



Ultrasonic / Ultra X

دستگاه فعال‌کننده اولتراسونیک بی‌سیم Ultra X (اندو اکتیویتور) با فعال‌سازی محلول‌های شست‌وشوی کانال ریشه، کارایی شست‌وشو را افزایش داده و به پاک‌سازی مؤثرتر نواحی پیچیده و غیرقابل دسترس فضای کانال ریشه کمک می‌کند.



ویژگی‌های فنی

- دو نشانگر LED برای نمایش وضعیت باتری و سطح توان خروجی
- دو سطح توان خروجی قابل تنظیم (High / Low)
- **High:** شدت ارتعاشات بیشتر، مناسب برای فعال‌سازی مؤثرتر محلول‌های شست‌وشو و پاک‌سازی بهتر کانال.
- **Low:** شدت ارتعاشات کمتر، مناسب برای کانال‌های باریک، ظریف و دارای انحنای زیاد.
- تیپ‌های قابل استریل در اتوکلاو
- سطح صیقلی و پرداخت‌شده تیپ‌ها
- برای کاهش اصطکاک و حرکت روان‌تر در کانال ریشه

انواع تیپ‌های Ultra X

دستگاه Ultra X همراه با تیپ‌های زیر عرضه می‌شود:

X Gold: تیپ سخت‌تر

- سایز: 25 | طول: 18 میلی‌متر
- انتقال مؤثر ارتعاشات اولتراسونیک و افزایش کارایی فعال‌سازی محلول‌های شست‌وشو.

X Blue: تیپ انعطاف‌پذیر

- سایز: 25 | طول: 18 میلی‌متر
- مناسب برای کانال‌های با انحنای متوسط و دسترسی بهتر به نواحی مختلف کانال.

X Silver: تیپ با انعطاف‌پذیری بالا

- سایز: 20 | طول: 21 میلی‌متر
- مناسب برای کانال‌های با انحنای شدید و آناتومی پیچیده، با قابلیت حرکت آسان در مسیر کانال.





Ultrasonic / Ultra X

نحوه عملکرد

اثر کاویتاسیون (Cavitation)

ایجاد میلیون‌ها حباب ریز در محلول شست‌وشو که با ترکیدن آن‌ها، پاکسازی مؤثر کانال ریشه افزایش می‌یابد.

جریان آکوستیک (Acoustic Streaming)

ارتعاشات اولتراسونیک موجب حرکت و گردش محلول شست‌وشو در کانال ریشه شده و نفوذ آن را به نواحی دور از دسترس افزایش می‌دهد.

موارد کاربرد

- حذف لایه اسمیر، باز شدن توبول‌های عاجی و خارج کردن دبری های ایجاد شده در فرآیند اندودانتیکس.
- تسهیل حذف ذرات عاج و بقایای بافتی از کانال.
- تخریب بیوفیلم و کاهش بار باکتریایی کانال.
- افزایش نفوذ محلول شست و شو به کانال‌های جانبی و نواحی غیرقابل دسترس و کمک به حذف حباب بخار (Vapor Lock).

باتری

- باتری لیتیومی با ظرفیت 1500 میلی‌آمپر ساعت
- نشانگر میزان شارژ باتری
- امکان استفاده مداوم تا 4/5 ساعت
- قابلیت Plug & Play؛ امکان استفاده از دستگاه در حین شارژ بدون ایجاد وقفه در روند درمان.





Ultrasonic / UltraMint Pro

دستگاه جرم‌گیر اولتراسونیک UltraMint Pro یک دستگاه حرفه‌ای و چندمنظوره است که با ایجاد ارتعاشات اولتراسونیک در نوک قلم، رسوبات جرم، پلاک‌های سخت و رنگدانه‌های سطحی دندان را با دقت و کارایی بالا حذف می‌کند. این دستگاه دارای سه حالت کاری مجزا شامل جرم‌گیری (Scaling)، پریودنتال (Periodontal) و اندودنتیک (Endodontic) است و امکان انجام طیف گسترده‌ای از درمان‌های دندانپزشکی را فراهم می‌کند.



کاربردهای دستگاه

1. جرم‌گیری (Scaling)

- برای حذف جرم‌های سخت، پلاک‌های کلسیفیه و لکه‌های سطحی دندان استفاده می‌شود.
- قلم مورد استفاده: سری G

2. پریودنتال (Periodontal)

- برای حذف رسوبات و پلاک‌های زیر لثه، پاکسازی پاکت‌های پریودنتال و کمک به درمان بیماری‌های لثه کاربرد دارد.
- قلم مورد استفاده: سری P

3. اندودنتیک (Endodontic)

- برای فعال‌سازی محلول‌های شست‌وشوی کانال ریشه و افزایش اثربخشی پاکسازی سیستم کانال ریشه در درمان‌های اندودنتیک استفاده می‌شود.
- قلم مورد استفاده: سری E





ویژگی‌های دستگاه

- **موتور هوشمند (AI Engine)**
بهره‌گیری از فناوری هوشمند برای کنترل دقیق عملکرد دستگاه و ارائه توان پایدار در طول درمان.
- **سیستم درایو موج سینوسی (Sine Wave Drive)**
با ایجاد ارتعاشی یکنواخت و نرم، تحریک ناشی از خروجی لحظه‌ای جریان را کاهش داده و موجب افزایش راحتی بیمار در حین درمان می‌شود.
- **ردیابی خودکار فرکانس**
فرکانس کاری دستگاه را به‌صورت خودکار در محدوده بهینه حفظ کرده و موجب افزایش پایداری عملکرد و راندمان درمان می‌شود.
- **نمایشگر لمسی هوشمند و ضدآب**
پنل لمسی با حساسیت بالا و طراحی ضدآب، امکان تنظیم سریع و آسان عملکرد دستگاه را فراهم می‌کند.
- **10 سطح قابل تنظیم توان**
امکان تنظیم شدت ارتعاش در 10 سطح؛ با افزایش شدت ارتعاش، قدرت عملکرد دستگاه افزایش می‌یابد.
- **حرکت بیضوی نوک دستگاه با اثر پولیش**
ایجاد الگوی حرکتی بیضوی موجب افزایش کارایی جرم‌گیری و صیقلی‌تر شدن سطح دندان پس از درمان می‌شود.
- **تنظیم هوشمند عملکرد متناسب با شرایط سطح دندان**
دستگاه با توجه به شرایط سطح دندان، عملکرد خود را بهینه کرده و اثربخشی درمان را افزایش می‌دهد.
- **سیستم بازخورد هوشمند (Intelligent Degenerative Feedback)**
با پایش مداوم شرایط عملکرد، خروجی دستگاه را به‌صورت هوشمند تنظیم کرده و پایداری و دقت درمان را حفظ می‌کند.
- **مقاومت در برابر نفوذ آب**
طراحی مقاوم در برابر نفوذ آب، دوام و ایمنی دستگاه را در محیط درمان افزایش می‌دهد.
- **سازگار با تمامی تیپ‌های Eighteeth**
- **محدوده فرکانس کاری: 25 تا 42 کیلوهرتز**





Ultrasonic / UltraMint Pro

طراحی و ارگونومی

- هندپیس جداشونده مجهز به LED قابل اتوکلاو، با طراحی ارگونومیک برای افزایش دید و سهولت دسترسی به ناحیه درمان.
- نگهدارنده هندپیس جداشونده و قابل اتوکلاو
- پنل لمسی مقاوم در برابر الکل و مواد ضدعفونی کننده

سیستم تأمین آب

- امکان تأمین آب به دو روش قابلیت استفاده از آب یونیت دندانپزشکی یا مخزن مستقل، متناسب با نیاز درمان.
- مخزن آب مستقل 900 میلی لیتری مجهز به درجه بندی 20 میلی لیتری برای آماده سازی آسان آب یا محلول های درمانی.
- قابلیت کنترل مستقیم جریان آب از روی هندپیس

ایمنی و کنترل عفونت

سیستم هوشمند خود تمیزشونده (Self-cleaning)

- شست و شوی خودکار مسیر آب دستگاه، ضدعفونی و آماده سازی آن را برای استفاده مجدد تسهیل می کند.
- با بهره گیری از سیستم خودتمیزشونده و قطعات قابل اتوکلاو، خطر انتقال آلودگی بین بیماران را کاهش می دهد

محتویات بسته بندی

- جعبه پلاستیکی قابل اتوکلاو
- 2 عدد هندپیس (EMS و Satelec)
- 6 عدد تیپ EMS (E4، P1، P3، G1، G2 و G4)
- آچار یونیورسال
- پدال پایی





Ultrasonic / surfy one

دستگاه SurfyOne یک سیستم فعال‌سازی سونیک برای درمان‌های اندودنتیک است که با ایجاد نوسانات فرکانس بالا در تیپ‌های پلیمری اختصاصی، محلول‌های شست‌وشوی کانال ریشه را فعال می‌کند. این ارتعاشات با افزایش نفوذ و اثربخشی محلول‌های شست‌وشو، به پاکسازی، حذف دبری‌ها و ضدعفونی مؤثرتر سیستم کانال ریشه کمک می‌کنند.

ویژگی‌های فنی

1. موتور براشلس (Brushless Motor)

عملکرد پایدار، طول عمر بالا، صدای کمتر و انتقال یکنواخت انرژی برای ایجاد ارتعاشات سونیک.

2. قطر هد: 10 میلی متر

3. ظرفیت باتری

باتری لیتیومی با ظرفیت 1400 میلی آمپر ساعت

4. زمان شارژ: حدود 4 ساعت

5. تیپ های پلیمری

• پلیمر انعطاف‌پذیر

انطباق بهتر با آناتومی کانال ریشه، همراه با مقاومت بالا در برابر شکستگی.

• طراحی تخت به شکل برگ بید

افزایش سطح تماس با محلول شست‌وشو و بهبود کارایی فعال‌سازی.

• قابلیت چرخش خودکار 360 درجه

امکان چرخش آسان تیپ تنها با یک دست، برای دسترسی بهتر در حین درمان.

• قابل اتوکلاو و استفاده مجدد تا 10 بار

• تنوع تیپ‌ها

تیپ‌های پلیمری همراه دستگاه در مشخصات زیر ارائه می‌شوند:

◀ سایز 15، تیپر 02، در طول‌های 17 و 21 میلی‌متر.

◀ سایز 25، تیپر 04، در طول‌های 17، 21 و 25 میلی‌متر.



**دو عملکرد در یک دستگاه****• فعال سازی سونیک (Sonic Activation)**

ارتعاشات با فرکانس بالا، محلول شستوشوی کانال ریشه را به طور مؤثر فعال کرده و با افزایش گردش و نفوذ آن، به حذف مؤثر لایه اسمیر و دبری ها از سیستم کانال ریشه کمک می کند و در نتیجه، کارایی شستوشوی کانال ریشه را افزایش می دهد.

• انتقال سیلر بایو سرامیکی (Bioceramic Sealer Delivery)

انتقال یکنواخت و کنترل شده سیلر بایو سرامیکی در کانال ریشه، با بهبود توزیع سیلر و کاهش احتمال ایجاد فضاهای خالی (Voids)، به ارتقای کیفیت آب بندی کانال ریشه کمک می کند.

مجهز به ۶ حالت کاری متناسب با کاربردهای مختلف**• + | حالت حساس (Sensitive)**

توان: W 0.7

فعال سازی ملایم محلول شستشو؛ مناسب برای دندان های حساس، دردناک یا دارای لقی.

• ++ | حالت استاندارد (Standard)

توان: W 2.7

فعال سازی استاندارد محلول شستشو؛ مناسب برای درمان های روتین اندودانتیکس.

• +++ | حالت پاک سازی (Cleaning)

توان: W 7.5

فعال سازی قدرتمند محلول شستشو؛ مناسب برای حذف مؤثر لایه اسمیر و بقایای داخل کانال ریشه.

• + ++ ++ | حالت عمیق (Deep)

توان: W 7.5

فعال سازی عمیق محلول شستشو؛ مناسب برای دندان های دارای کانال های جانبی متعدد.

• + | انتقال سیلر بایو سرامیکی (Standard)

توان: W 0.61

انتقال یکنواخت و کنترل شده سیلر بایو سرامیکی؛ مناسب برای کانال های ریشه با آناتومی معمولی.

• ++ | انتقال سیلر بایو سرامیکی (Complex)

توان: W 0.65

انتقال مؤثر سیلر بایو سرامیکی؛ مناسب برای کانال های خمیده و دارای آناتومی پیچیده.

• فرکانس کاری: ۴۰ تا ۴۰۰ هرتز



Obturator

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

Fast-Pack Pro

Fast-Fill



Obturator / Fast-Fill

دستگاه Fast-Fill برای گرم کردن و تزریق گوتاپرکای ترموپلاستیک به داخل کانال‌های ریشه پس از آماده‌سازی کانال طراحی شده است. این دستگاه با انجام مرحله Backfill در تکنیک پرکردگی سه بعدی کانال ریشه (3D Obturation)، امکان تزریق یکنواخت گوتاپرکا و ایجاد پرکردگی همگن و کنترل‌شده در بخش باقیمانده کانال ریشه را فراهم می‌کند.



ویژگی‌های فنی

1. سیستم تزریق گوتاپرکا

- قابلیت تنظیم دما متناسب با انواع گوتاپرکای ترموپلاستیک و تنظیم سرعت تزریق در سه سطح (کم، متوسط و زیاد).
- کاهش احتمال ایجاد فضاهای خالی (Voids) و دستیابی به پرکردگی همگن کانال ریشه.

2. تیپ‌های تزریق گوتاپرکا

- تیپ‌های نقره‌ای قابل اتوکلاو، مناسب برای استفاده مجدد.
- حفظ دمای گوتاپرکای ترموپلاستیک و ایجاد جریان یکنواخت هنگام تزریق در کانال ریشه.
- قابلیت چرخش 360 درجه برای تسهیل تزریق در تمامی زوایا.
- سوزن بلند، امکان دسترسی بهتر و دید مناسب‌تر را حین درمان فراهم می‌کند.
- طراحی تیپ‌ها امکان تمیز کردن، تعویض و جای گذاری آسان تیپ و سوزن را فراهم می‌کند.
- دستگاه به صورت استاندارد همراه با دو تیپ تزریق با گیج‌های 23 و 25 عرضه می‌شود.

3. کنترل هوشمند

- سه حافظه قابل برنامه‌ریزی (T1 تا T3) برای ذخیره تنظیمات دمای دلخواه.
- قابلیت تنظیم دما در بازه 100 تا 200 درجه سانتی‌گراد.
- دستیابی به دمای 200 درجه سانتی‌گراد در مدت کمتر از 20 ثانیه.
- نمایشگر میزان گوتاپرکای باقیمانده در مخزن.
- نمایشگر میزان شارژ باقی مانده باتری.

4. طراحی ارگونومیک

- طراحی ارگونومیک و وزن سبک، کنترل آسان و کاربری راحت را فراهم می‌کند.
- با نگه داشتن دکمه دستگاه، تزریق گوتاپرکای ترموپلاستیک به صورت پیوسته انجام می‌شود.

5. باتری قدرتمند

- مجهز به باتری لیتیومی 2600 میلی‌آمپرساعتی با عملکرد پایدار.
- زمان شارژ کامل باتری حدود 4 ساعت است.
- قابلیت Plug & Play؛ در صورت کاهش شارژ باتری، دستگاه هنگام اتصال به آداپتور نیز قابل استفاده است.



Obturator / Fast-Pack Pro

دستگاه Fast-Pack Pro برای گرم کردن، نرم سازی و برش گوتا پرکای اصلی طراحی شده و مناسب برای تکنیک های آبچوریشن لترالی و ورتیکالی است. این دستگاه با کنترل دقیق دما و انتقال حرارت موضعی، به ویژه در مرحله Down-Pack در تکنیک Warm Vertical Con- densation، امکان انجام تراکم عمودی گوتا پرکا و دستیابی به سیل اپیکالی قابل اعتماد در درمان ریشه را فراهم می کند.



ویژگی های فنی

1. سیستم گرمایش کنترل شده پیشرفته

گرمایش سریع (Fast Heating)

- گرمایش سریع تیپ، مدت زمان انتقال حرارت را کاهش داده و خطر آسیب به لیگامان پریودنتال (PDL) را به حداقل می رساند.
- زمان رسیدن به دمای 200 درجه سانتی گراد: حدود 0.2 ثانیه
- زمان رسیدن به دمای 250 درجه سانتی گراد: حدود 0.5 ثانیه

خنک شدن سریع (Swift Cooling)

- خنک شدن سریع تیپ از چسبیدن گوتا پرکا به آن جلوگیری می کند.
- زمان خنک شدن: حدود 2 ثانیه

2. تیپ با گرمایش داخلی

- تنها 4 الی 5 میلی متر انتهایی تیپ گرم می شود و بخش باقیمانده آن خنک باقی می ماند.
- این طراحی خطر انتقال حرارت به بافت های نرم اطراف را به حداقل می رساند.
- دستگاه به صورت استاندارد همراه با سه تیپ قابل تعویض در سایزهای 40/0.025، 50/0.05 و 60/0.06 عرضه می شود.

3. کنترل هوشمند دما

- قابلیت تنظیم دما در بازه 90 تا 250 درجه سانتی گراد.
- امکان تنظیم و ذخیره سازی دما و زمان قطع حرارت در پنج حافظه مستقل (T1-T5)، متناسب با انواع مواد پرکننده کانال ریشه.
- نمایش لحظه ای دمای واقعی برای کنترل دقیق و پایدار فرآیند گرم سازی.

4. طراحی ارگونومیک

- دکمه رینگ شکل شروع / توقف با قابلیت فعال سازی ۳۶۰ درجه، امکان فعال سازی دستگاه را از تمامی زوایا فراهم می کند.
- مناسب برای استفاده توسط کاربران راست دست و چپ دست.

5. باتری قدرتمند

- باتری لیتیومی 2600 میلی آمپر ساعت با ظرفیت بالا.
- زمان شارژ: حدود 2 ساعت تا شارژ کامل.
- زمان کارکرد: حدود 4 ساعت استفاده مداوم در دمای 250 درجه سانتی گراد.
- قابلیت Plug & Play؛ در صورت کاهش شارژ باتری، دستگاه هنگام اتصال به آداپتور نیز قابل استفاده است.



RVG

سیستم دیجیتال RVG

ارتقا استانداردهای تشخیصی در دندانپزشکی

سیستم رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی (RVG)، راهکاری مدرن برای ثبت تصاویر دقیق و باکیفیت، بدون نیاز به فیلم‌های رادیوگرافی سنتی و تاریک خانه است. این سنسورها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته CCD یا CMOS، تصاویر را در کوتاه‌ترین زمان روی سیستم نمایش می‌دهند.

کاربردها

- تصویربرداری داخل دهانی
- بررسی‌های تشخیصی دندانپزشکی
- ارتقای سرعت و دقت در تشخیص
- استفاده در مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی

ویژگی‌های کلیدی

- کاهش چشمگیر دوز اشعه ایکس و افزایش ایمنی بیمار.
- نمایش آنی تصویر برای تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر.
- نصب و راه‌اندازی سریع، بدون پیچیدگی‌های معمول.
- سازگاری با سیستم‌ها و نرم‌افزارهای مختلف تصویربرداری.
- حذف هزینه و زمان مربوط به ظهور و چاپ فیلم.

قابلیت‌های عملیاتی و فنی (NanoPix)

- **سرعت فرآیند:** نمایش تصویر نهایی تنها در ۳ ثانیه.
- **پایداری عملکرد:** تضمین کیفیت تصویر برای بیش از ۵۰,۰۰۰ مورد اکسپوز.
- **استاندارد حفاظتی IP68:** مقاومت کامل در برابر نفوذ آب و گرد و غبار جهت استریل‌سازی آسان.
- **پورت اتصال:** رابط USB 2.0 با قابلیت تبدیل آنالوگ به دیجیتال ۱۶ بیتی.
- **کابل فوق مقاوم:** کابل تست شده برای ۷۰,۰۰۰ بار خم شدن متوالی بدون افت کیفیت سیگنال.
- **طراحی ارگونومیک:** ضخامت بسیار کم (۴/۴ میلی‌متر) و دارای محل قرارگیری انگشت برای پوزیشن دهی دقیق

سایز های Nanopix

با سه سایز سنسور ارائه شده، سری RVG نانوپیکس طیف وسیعی از نیازهای بالینی را پوشش می‌دهد:

NanoPix 2

NanoPix 1.5

NanoPix 1

**NanoPix 1**

ایده‌آل برای تصویربرداری دقیق در دندانپزشکی اطفال و همچنین در مواردی که نیاز به ثبت تصاویر از نواحی با دسترسی محدود (مانند کلوزبایت) است.

- **تکنولوژی:** APS CMOS
- **اسینتلاتور:** Csl
- **ماتریس پیکسل:** 1500×1000
- **اندازه پیکسل:** 20 میکرومتر
- **رزولوشن تئوری:** 25 دور در میلی‌متر
- **رزولوشن واقعی:** بیشتر از 12 دور در میلی‌متر
- **ابعاد ناحیه فعال:** 30×20 میلی‌متر
- **ابعاد مکانیکی:** $38/5 \times 25$ میلی‌متر
- **ضخامت:** 4/4 میلی‌متر
- **مبدل A/D:** بیشتر از 16 بیت
- **رابط انتقال داده:** USB 2.0
- **طول کابل:** 3 متر
- **درجه حفاظت:** IP68

**NanoPix 1.5**

یک گزینه تطبیق‌پذیر که هم برای معاینات دندانپزشکی کودکان و هم بزرگسالان، کارایی بالایی دارد.

- **تکنولوژی:** APS CMOS
- **اسینتیلاتور:** CsI
- **ماتریس پیکسل:** 1650 × 1200
- **اندازه پیکسل:** 20 میکرومتر
- **رزولوشن تئوری:** 25 دور در میلی‌متر
- **رزولوشن واقعی:** بیشتر از 12 دور در میلی‌متر
- **ابعاد ناحیه فعال:** 33 × 24 میلی‌متر
- **ابعاد مکانیکی:** 43/5 × 29 میلی‌متر
- **ضخامت:** 4/4 میلی‌متر
- **مبدل A/D:** بیشتر از 16 بیت
- **رابط انتقال داده:** USB 2.0
- **طول کابل:** 3 متر
- **درجه حفاظت:** IP68



NanoPix 2

برای ثبت تصاویر رادیوگرافیک با پوشش‌دهی وسیع در بیماران بزرگسال طراحی شده است.

- **تکنولوژی:** APS CMOS
- **اسینتلاتور:** Csi
- **ماتریس پیکسل:** 1000 × 1500
- **اندازه پیکسل:** 20 میکرومتر
- **رزولوشن تئوری:** 25 دور در میلی‌متر
- **رزولوشن واقعی:** بیشتر از 12 دور در میلی‌متر
- **ابعاد ناحیه فعال:** 36 × 26 میلی‌متر
- **ابعاد مکانیکی:** 45 × 31/6 میلی‌متر
- **ضخامت:** 4/4 میلی‌متر
- **مبدل A/D:** بیشتر از 16 بیت
- **رابط انتقال داده:** USB 2.0
- **طول کابل:** 3 متر
- **درجه حفاظت:** IP68



Light Cure / Curing Pen

لایت کیور Curing Pen برای پلیمریزاسیون سریع، یکنواخت و مؤثر انواع مواد ترمیمی نوری طراحی شده است. این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری LED و طراحی قلمی ارگونومیک، کنترل بهتر، کاربری آسان و دسترسی مطلوب به تمامی نواحی دهان را در طول درمان فراهم می‌کند.

ویژگی‌های فنی

- مجهز به LED 4 پر قدرت (3 LED آبی و 1 LED بنفش)
- طول موج: 380 تا 515 نانومتر
- شدت نور: 600 - 2300 mW/cm²
- توان: 10 وات
- لنز اپتیکال با قطر 11 میلی‌متر
- هد با قابلیت چرخش 360 درجه
- نمایشگر دیجیتال تکرنگ
- باتری لیتیومی: ظرفیت 1600 میلی‌آمپر ساعت
- زمان شارژ: 2 تا 3 ساعت
- عملکرد باتری: بیش از 1200 سیکل کیورینگ با هر بار شارژ (بر اساس زمان تابش 3 ثانیه)
- وزن: 109 گرم
- ابعاد: 24 × 21 × 230 میلی‌متر

6 حالت کاری قابل انتخاب

- M0، M1 و M2: سه حالت با شدت نور قابل تنظیم (1000، 1500، 2300 mW/cm²)
- Ramp: افزایش تدریجی شدت نور (1000 mW/cm²)
- Pulse: تابش پالسی (1000 mW/cm²)
- Detect: حالت تشخیص پوسیدگی (600 mW/cm²)





Motor Surgery

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

Turbo Motor

Motor Implant



جدیدترین و پیشرفته‌ترین نسل سیستم‌های جراحی کمپانی Eighteeth

موتور جراحی MotorSurg، جدیدترین دستاورد مهندسی کمپانی Eighteeth، استانداردهای نوین و دقیقی را در حوزه جراحی‌های ایمپلنت پایه‌گذاری کرده است. این دستگاه با تلفیق توان عملیاتی بالا، دقت در پایش و طراحی ارگونومیک، پاسخگوی نیازهای پیچیده کلینیکی برای جراحان و متخصصانی است که کیفیت، پایداری و ایمنی را اولویت اصلی خود می‌دانند.

ویژگی های موتور ایمپلنت Eighteeth - MotorSurg

- میکروموتور نوری (LED) بسیار سبک و ارگونومیک
- دارای 8 برنامه پیش‌فرض قابل شخصی‌سازی
- پدال مولتی فانکشن (کنترل پمپ آب، تغییر برنامه، جهت چرخش و کنترل سرعت)
- صفحه نمایش LCD لمسی و رنگی با کاربری آسان
- محدوده سرعت 200 - 40000 دور در دقیقه
- گشتاور 5 - 80 نیوتن سانتی‌متر
- پمپ آب بی‌صدا با قابلیت تنظیم دقیق جریان خروجی
- سیستم کالیبراسیون خودکار برای تضمین دقت گشتاور
- طراحی ظریف و اشغال فضای کم در یونیت
- دارای استانداردهای معتبر بین‌المللی CE اروپا و ISO

نکته

1. موتور ایمپلنت MotorSurg یکی از هوشمندترین دستگاه‌های جراحی است که برای حفر دقیق سایت ایمپلنت و جایگذاری پست در استخوان فک استفاده می‌شود. این دستگاه با ارائه گشتاور ثابت و حرکات چرخشی بدون لرزش، محیطی ایمن و پیش‌بینی‌پذیر را برای جراح فراهم می‌کند.

2. موتور جراحی ایتیس به دلیل استفاده از تکنولوژی پیشرفته در ساخت میکروموتور، طول عمر بالایی داشته و در برابر استریل‌سازی‌های مکرر (اتوکلاو) مقاومت بسیار بالایی دارد.





ویژگی‌های برجسته فنی

- **دقت و پایداری عملکرد**

بهره‌گیری از بلبرینگ‌های ساخت آلمان در کنار الکتروموتور قدرتمند، عملکردی بی‌نقص را تضمین می‌کند. این دستگاه با ارائه محدوده گشتاور 5 تا 80 نیوتن سانتی‌متر و سرعت 200 تا 40,000 دور در دقیقه، سازگاری کاملی با انواع آنگل‌های جراحی استاندارد (1:1، 1:16، 1:20، 1:27) دارد.

- **مانیتورینگ هوشمند و ثبت داده‌ها**

سیستم پایش لحظه‌ای گشتاور (Real-Time Torque)، امکان بررسی دقیق در حین جراحی را فراهم می‌آورد. علاوه بر این قابلیت استخراج منحنی‌های گشتاور از طریق پورت USB، امکان تحلیل‌های تخصصی پس از جراحی را فراهم می‌کند.

- **سیستم روشنایی حرفه‌ای**

نور LED داخلی با شدت روشنایی بیش از 8000 لوکس، دیدی کاملاً شفاف و بدون سایه را در حفره دهان ایجاد می‌کند که ضامن دقت حداکثری در مراحل مختلف درمان است.

- **کالیبراسیون هوشمند**

قابلیت کالیبراسیون سریع الکتروموتور و آنگل تنها با فشردن یک دکمه، اطمینان از صحت گشتاور و سرعت خروجی را در تمامی مراحل جراحی تضمین می‌کند.

برتری‌های کلینیکی

- **قابلیت اطمینان در استخوان‌های متراکم**

خروجی توان پایدار تا 80 نیوتن سانتی‌متر، پاسخگویی دستگاه را در شرایط سخت کلینیکی بهینه‌سازی کرده است.

- **مهندسی متریال پیشرفته**

استفاده از پوشش‌های ضدزنگ ارتقاءیافته در کلیپ هندپیس و بهبود سیستم آب‌بندی داخلی، منجر به افزایش طول عمر دستگاه و مقاومت بیشتر در برابر خوردگی شده است.

- **سیستم آب‌بندی دوگانه (Dual-Sealing)**

طراحی خاص هد آنگل، مانع از نفوذ ترشحات و بقایای جراحی به داخل دستگاه می‌شود که ریسک آلودگی متقاطع را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

- **پدال پایی هوشمند**

طراحی آسپتیک و ارگونومیک پدال، کاربری دستگاه را در حین جراحی تسهیل کرده است. حساسیت عملکردی پدال (فعال‌سازی با فشار 2 میلی‌متر)، تجربه‌ای روان و دقیق را برای جراح به ارمغان می‌آورد که شامل عملکردهای زیر است:

شروع و توقف عملکرد (Start/Stop)

کنترل میزان حجم آب

تغییر برنامه‌های پیش‌فرض

کنترل جهت چرخش (Forward/Reverse)





Motor Surgery / Turbo Motor

MotorTurbo & E-ASP1

قدرتی حرفه‌ای برای درمانی دقیق و مطمئن

MotorTurbo و آنگل E-ASP1 مجموعه‌ای حرفه‌ای از موتور الکتریکی و هندپیس پرسرعت هستند که برای دندانپزشکانی طراحی شده‌اند که به قدرت، دقت، دوام و کاربری آسان اهمیت می‌دهند. این سیستم با بهره‌گیری از موتور براشلس، رابط کاربری مدرن و هندپیس مجهز به نور LED، عملکردی روان و قابل اعتماد را در درمان‌های دندانپزشکی فراهم می‌کند.

ویژگی‌های فنی MotorTurbo

- موتور براشلس با طول عمر بالا
- بازه سرعت: 2000 - 40000 دور در دقیقه
- گشتاور : بیش از 1 نیوتن سانتی‌متر
- صفحه نمایش رنگی LCD با کاربری ساده
- ابعاد : 130 × 129 × 54 میلی‌متر
- وزن : 600 گرم
- 4 برنامه حافظه M1 تا M4
- 4 نسبت انتقال: 1:5، 1:1، 1:16، 1:20
- قابلیت تنظیم سرعت، شدت نور و جهت چرخش
- کانکتور استاندارد چهار سوراخه
- هندپیس ارگونومیک با فیبر نوری LED
- اسپری چندپورته برای خنک‌سازی بهتر
- چاک پوش‌باتن با تعویض سریع فرز
- قابلیت اتوکلاو تا 134 درجه سانتی‌گراد





Motor Surgery / Turbo Motor

ویژگی های فنی E-ASP1

- نسبت: 1:5
- حداکثر سرعت مجاز: 40000 دور در دقیقه
- اتصال: مطابق با استاندارد ISO 3964
- نوع چاک: پوش باتن
- قطر شنک فرز: 1/6 میلی متر
- استریلیزاسیون: اتوکلاو بخار تا 134 درجه سانتی گراد

مزایای کلیدی MotorTurbo & E-ASP1

- قدرت برش بالا
- گشتاور پایدار و عملکرد یکنواخت برای درمانی دقیق و مطمئن
- آرام و بادوام
- موتور براشلس با صدای کمتر و طول عمر بیشتر نسبت به موتورهای معمولی
- دید بهتر در حین درمان
- فیبر نوری LED با تابش مستقیم نور برای افزایش دید و کاهش خستگی چشم
- راحتی بیشتر
- سیستم خنک کننده مؤثر برای بهبود تجربه درمان برای بیمار و پزشک





گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

Instrument

Loupe

Microscope



Loupe

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

SLH Prismatic

SL Series

DFK

SLT TTL

Medical Headlight



zumax



SL Series

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

SLH (2.5-3.0-3.5)

SLE (2.5-3.0-3.5)

SLF (2.5-3.0-3.5)



zumax



SL Series / SLE (2.5-3.0-3.5)

SLE | حرفه‌ای و شیک (Titanium Frame)

تجسم کیفیت و استایل برای پزشکانی که به جزئیات اهمیت می‌دهند. فریم تیتانیومی این مدل، علاوه بر مقاومت بالا و وزن بسیار کم، ظاهری حرفه‌ای و متمایز به شما می‌بخشد. تنظیمات دقیق اپتیکی در این مدل، میدان دید گسترده و شفاف را برای درمان‌های تخصصی تضمین می‌کند.

مزیت: فریم تیتانیومی بسیار سبک و مقاوم

Magnification: 2.5X | 3X | 3.5X





SL Series / SLH (2.5-3.0-3.5)

SLH | ثبات و پایداری در سطح بالا (Headband Design)

مدل SLH با طراحی هدبندی (کلاه‌هی) تخصصی، پاسخی است به نیاز دندانپزشکانی که برای عملکردهای طولانی‌مدت، به ثبات بی‌نقص و توزیع متوازن وزن نیاز دارند. این لوپ با قرارگیری دقیق بر روی سر، فشار را از روی بینی و گوش‌ها برداشته و پایداری مطلق را در حین درمان‌های پیچیده و دقیق فراهم می‌آورد.

مزیت: طراحی هدبندی برای توزیع وزن ایده‌آل و ثبات حداکثری

ویژگی: قابلیت تنظیم چندمحوره (زاویه، فاصله مردمک‌ها و جابه‌جایی عمودی)

Magnification: 2.5X | 3X | 3.5X





SL Series / SLF (2.5-3.0-3.5)

SLF | سبک و کاربردی (Sport Frame)

انتخابی هوشمندانه برای دندانپزشکانی که به دنبال تعادلی میان «وزن ایده‌آل» و «کارایی اپتیکی» هستند. مدل SLF با طراحی اسپرت و وزن مینیمال، خستگی حین کار را به حداقل رسانده و بزرگنمایی شفاف را در طول درمان‌های عمومی ارائه می‌دهد.

مزیت: طراحی اسپرت برای راحتی حداکثری

Magnification: 2.5X | 3X | 3.5X





zumax



SLH Prismatic

SLH PRISMATIC

برای پزشکانی که به بزرگنمایی بالاتر و دید دقیق‌تر نیاز دارند.

Magnification: 4X | 5X | 6X

ویژگی‌ها

- لنزهای Achromatic با پوشش‌های Anti-Reflective و Multi-Coated
- تصویر روشن، شفاف و با وضوح بالا
- کاهش مؤثر انعکاس و بازتاب نور
- قابلیت تنظیم مستقل هر یک از اپتیک‌ها
- امکان تنظیم ارتفاع و زاویه دید
- قابلیت انتخاب فاصله کاری (Working Distance) متناسب با نیاز کاربر
- امکان استفاده از سیستم روشنایی LED Illumination
- قابلیت استفاده با باتری بی‌سیم برای آزادی عمل و راحتی بیشتر هنگام کار

:Working Distance

mm 500 | 460 | 420 | 340





zumax



SLT TTL

SLT TTL


بزرگنمایی بالا، وزن پایین
اگر ساعت‌ها با لوپ کار می‌کنید، وزن لوپ اهمیت زیادی دارد.
SLT TTL با طراحی Prismatic TTL و وزن حدود 75 گرم با لنز، برای پزشکی طراحی شده
که به دنبال ترکیب:

بزرگنمایی بالا، اپتیک دقیق، وزن پایین و راحتی بیشتر هستند.

Magnification: 4X | 5X | 6X

Frame Options: Sport | Titanium

یک انتخاب حرفه‌ای برای پزشکی که دقت را با راحتی ترکیب می‌کنند.

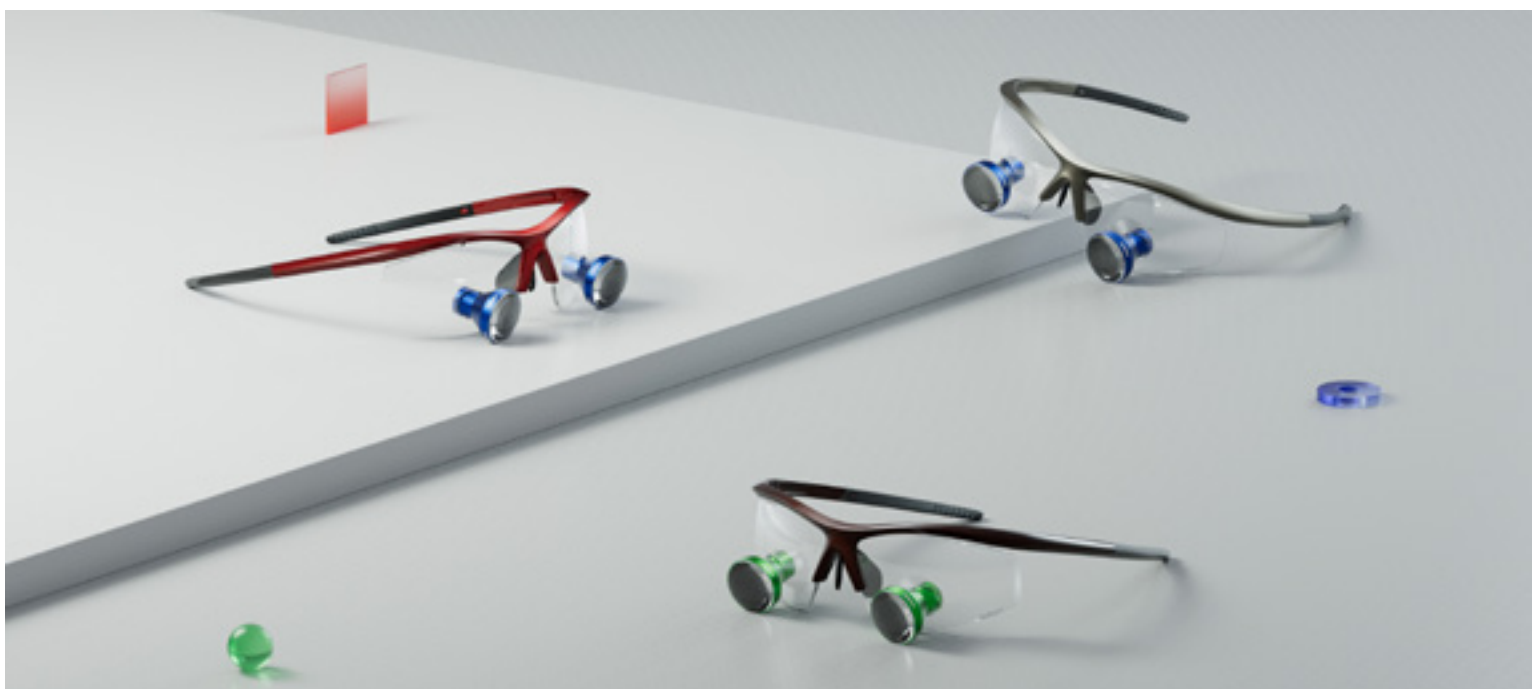

TTL COLORFUL



TTL SPORT



TTL CLASSIC



DFK

DFK

- دید وسیع‌تر، دقت بیشتر، راحتی در کار
- طراحی ارگونومیک 48°
- میدان دید وسیع‌تر نسبت به لوپ‌های جراحی سنتی، برای مشاهده بهتر محدوده کار
- **Parallel Line of Sight**
- مسیر دید موازی برای کاهش خستگی چشم و کمک به حفظ وضعیت ارگونومیک بدن
- **قابلیت تنظیم پیشرفته**
- ◀ تنظیم پیوسته فاصله کاری، (PD) Pupillary Distance و Eye Point
- ◀ امکان تغییر بین دید عادی و بزرگنمایی بدون نیاز به خم کردن سر
- **Magnification:** 3.0X | 4.0X | 5.0X
- **Weight:** 91g | 94g | 96g
- Working Distance: 400-550mm (Adjustable)
- قابل استفاده با چراغ پیشانی ZUMAX





zumax



Medical Headlight

Medical Headlight

نور دقیق؛ درست در جایی که به آن نیاز دارید

حتی بهترین لوپ بدون نور مناسب نمی‌تواند تمام ظرفیت خود را نشان دهد. هدلایت‌های ZUMAX با استفاده از LED و طراحی حرفه‌ای، نور سفید و متمرکز را برای روشن‌کردن میدان درمان فراهم می‌کنند.

مزایای کلیدی:

- نور روشن، متمرکز و بدون ایجاد سایه
- منبع نور **LED** با طول عمر بالا
- بدون تولید گرمای آزاردهنده مانند چراغ‌های هالوژن
- قابلیت تنظیم جهت تابش نور
- باتری قابل شارژ با کاربری آسان
- طراحی سبک و ارگونومیک
- مجهز به نشانگر وضعیت باتری
- امکان استفاده هم‌زمان در حین شارژ، در مدل‌های مشخص
- مجهز به فیلتر زرد برای کاهش اثرات نور آبی
- مناسب برای طیف گسترده‌ای از کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی

HL8200

HL8260



Medical Headlight / HL8260

ZUMAX HL8260

- قدرت نور برای کارهای دقیق
- دمای رنگ: 5000K
- شدت روشنایی: Lux 75000
- فاصله کاری: 200 میلی متر
- LED 5W
- عمر LED: حدود 20,000 ساعت
- وزن: حدود 69 گرم
- تنظیم عمودی: $\pm 45^\circ$
- تنظیم Spot
- کنترل شدت نور
- باتری قابل شارژ
- امکان استفاده هنگام شارژ
- فیلتر زرد اختیاری
- مدت زمان کارکرد باتری
- Portable: ≥ 7 Hours
- Wireless: ≥ 3 Hours

قدرت نور بالا، کنترل دقیق و عملکرد حرفه‌ای

انتخابی مناسب برای متخصصانی است که در کارهای دقیق به روشنایی قدرتمند و متمرکز نیاز دارند.





zumax



Medical Headlight / HL8200

ZUMAX HL8200

- سبک، کاربردی، حرفه‌ای
 - دمای رنگ: 5000K
 - شدت روشنایی: ≤ 35000 Lux در فاصله کاری 200 میلی‌متر
 - LED 3W
 - وزن: حدود 16 گرم
 - عمر LED: حدود 20,000 ساعت
 - قابلیت تنظیم عمودی: $\pm 45^\circ$
 - باتری: قابل شارژ
 - امکان استفاده از دستگاه هنگام شارژ
 - فیلتر زرد: اختیاری
 - مدت زمان کارکرد باتری
 - Portable: ≥ 7 Hours
 - Wireless: ≥ 3 Hours
- اگر سبک بودن اولویت شماست، این هدلایت کاملاً مناسب است.





zumax



Instrument

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

پنس خارج سازی ابزار شکسته
از کانال ریشه

Kamand

Zumax Broken Instrument
Removal Kit

**Kamand**

این ابزار با بهره‌گیری از مکانیزم نوآورانه سیم و لوپ، به‌طور اختصاصی برای خارج کردن ابزارهای شکسته از کانال ریشه طراحی شده و امکان انجام این فرایند را با دقت، کنترل و کارایی بالا فراهم می‌کند.

اجزای کیت:**• لوپ Kamand**

مهم‌ترین بخش سیستم که با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته سیم و لوپ (Wire & Loop)، برای خارج کردن دقیق و مؤثر ابزارهای شکسته از کانال ریشه طراحی شده است.

**• هشت سوزن در چهار سایز**

مجموعه‌ای کامل از سوزن‌ها در اندازه‌های متنوع که امکان انتخاب مناسب برای شرایط مختلف درمانی را فراهم کرده، دقت و کارایی بالایی را ارائه می‌دهد.

سیم	سوزن
60	30G 
80	27G 
100	25G 
150	24G 

نکته: توصیه می‌شود پیش از استفاده بالینی، تکنیک خارج سازی فایل شکسته ابتدا روی مدل‌های آموزشی یا دندان‌های کشیده شده تمرین شود تا مهارت لازم برای انجام درمان با اطمینان بیشتر کسب گردد.



**نکات مهم در انتخاب سیم لوپ**

اگر سیم لوپ پاره شود، دو علت احتمالی وجود دارد:

- 1.** نیروی لازم برای خارج سازی قطعه شکسته از استحکام کششی سیم لوپ بیشتر است. در این حالت، باید اندازه لوپ را یک سایز بزرگتر انتخاب کنید. برای مثال، اگر سیم لوپ با گیج 27 پاره شد، از گیج 25 (سایز 100) استفاده نمایید.
- 2.** گاهی لبه های فایل شکسته بسیار تیز و ساینده هستند و باعث پارگی سیم نازک لوپ می شوند. در این شرایط باید از لوپ مقاوم تر (ضخیم تر) استفاده شود.





پنس خارج سازی ابزار شکسته از کانال ریشه / Instrument

پنس خارج سازی ابزار شکسته از کانال ریشه

ویژگی‌ها

- قابلیت تنظیم 360 درجه برای دسترسی و موقعیت‌دهی آسان
- طراحی مناسب سری پنس برای گرفتن و نگهداشتن دقیق ابزار شکسته
- گیرش دقیق و قدرتمند با نیروی گیرش بالا و پایداری مناسب




مشخصات فنی

1. قطر × طول: 0.9 میلی‌متر × 20 میلی‌متر

اقلام همراه

- سری پنس × 1
- دسته پنس × 1
- رابط شست‌وشو × 1

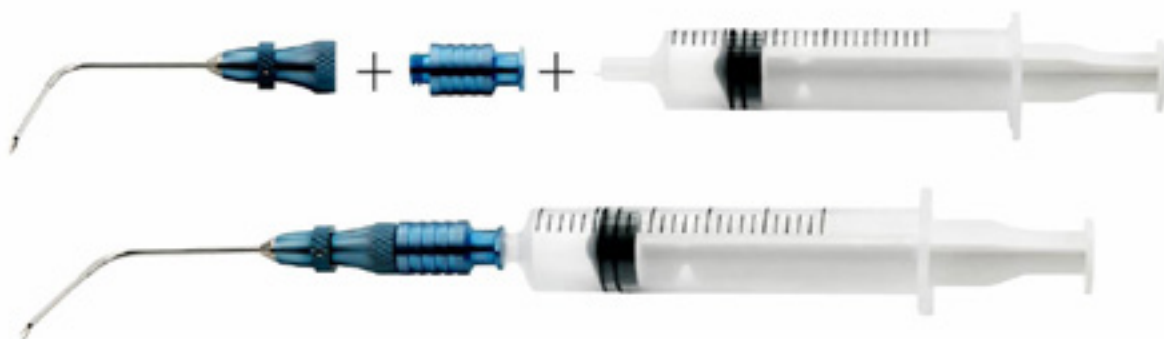



Instrument / Zumax Broken Instrument Removal Kit

Zumax Broken Instrument Removal Kit

کیت خارج کردن ابزار شکسته Zumax مجموعه‌ای تخصصی از ابزارهای دقیق اندودانتیک است که برای خارج‌سازی ابزارهای شکسته از کانال ریشه طراحی شده است. این کیت با فراهم کردن ابزارهای موردنیاز برای ایجاد دسترسی، آزاد سازی و گیراندازی ابزار شکسته، فرآیند خارج سازی را با دقت، کنترل و کارایی بالاتر امکان‌پذیر می‌سازد. طراحی ارگونومیک، کیفیت ساخت بالا و تنوع ابزارهای موجود، این محصول را به گزینه‌ای مناسب برای درمان‌های پیچیده اندودانتیک، به‌ویژه در کنار میکروسکوپ دندانپزشکی تبدیل کرده است.

مزایای محصول

- حداقل برداشت از عاج دیواره کانال ریشه
- کاهش خطر آسیب به ساختار دندان در حین خارج سازی ابزار شکسته
- کاهش احتمال شکستگی مجدد ابزار هنگام استفاده از تکنیک اولتراسونیک
- امکان گیراندازی دقیق ابزار شکسته با استفاده از پنس میکروسکوپی اندودانتیک
- طراحی‌شده برای استفاده آسان و کنترل بهتر مراحل درمان
- مناسب برای استفاده در کنار میکروسکوپ دندانپزشکی



اجزای کیت

- 1 عدد هند اکسترکتور
- 4 عدد سری اکسترکتور
- 1 عدد اکسترکتور پنس چنگکی (Crab-Claw Shaped Tweezers) برای گرفتن و نگهداشتن قطعه شکسته
- 3 عدد اکسترکتور در سایزهای مختلف برای خارج کردن فایل یا ابزار شکسته از کانال ریشه
- 3 عدد ترفاین بر در سایزهای مختلف
- 1 عدد رابط ترفاین بر



Microscope

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

OMS2380

OMS2350

OMS3500

OMS3200



میکروسکوپ جراحی Zumax OMS2350

دقت بی حد و مرز در دستان متخصص

معرفی محصول

میکروسکوپ جراحی Zumax OMS2350، یک ابزار پیشرفته و مهندسی شده برای متخصصانی است که دقت و کیفیت دید، اولویت اول آن‌ها است. این دستگاه با هدف ارتقای استانداردهای جراحی‌های ظریف و میکروسکوپی و ترکیبی از تکنولوژی نوری طراحی شده تا فاصله بین چشم جراح و بافت‌های بسیار ریز را از بین ببرد. ارگونومیک بودن میکروسکوپ OMS2350 تجربه جراحی را متحول می‌کند.



ویژگی‌های فنی و عملکردی

• سیستم اپتیک پیشرفته

بهره‌مندی از لنزهای با کیفیت بالا برای ارائه تصویری با کنتراست فوق‌العاده و وضوح بسیار بالا (High Definition) جهت تشخیص دقیق مرز بافت‌ها.

• بزرگ‌نمایی متغیر و دقیق

قابلیت تنظیم بزرگ‌نمایی برای طیف وسیعی از نیازهای جراحی، از مشاهده ساختارهای کلی تا جزئیات میکروسکوپی.

• طراحی ارگونومیک و هوشمند

بدنه و سیستم حرکتی به گونه‌ای طراحی شده است که جراح بتواند بدون فشار به گردن و کمر، در پوزیشن‌های مختلف جراحی، بهترین زاویه دید را داشته باشد.

• نورپردازی متمرکز و خنثی

سیستم روشنایی داخلی با قابلیت تنظیم شدت نور، جهت حذف سایه‌ها و فراهم کردن دیدی شفاف بدون ایجاد حرارت اضافی در ناحیه عمل.

• پایداری ساختاری

بدنه مستحکم و سیستم تثبیت‌کننده که از لرزش‌های ریز در حین جراحی جلوگیری کرده و دیدی کاملاً ثابت و بدون لرزش را فراهم می‌کند.





کاربردهای اصلی

این میکروسکوپ برای طیف گسترده‌ای از تخصص‌ها بهینه‌سازی شده است:

- **دندان پزشکی**

درمان ریشه (Endodontics)، جراحی‌های پریودنتال، ترمیم‌های بسیار ظریف.

- **جراحی‌های عمومی و تخصصی دندان پزشکی**

انجام عمل‌هایی که نیازمند دقت میلی‌متری و مشاهده دقیق عروق و اعصاب هستند.

- **مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی**

استفاده برای آموزش جراحان جهت مشاهده دقیق ساختارهای بیولوژیکی.

مزایای رقابتی

- **افزایش نرخ موفقیت درمان**

با دید بهتر، احتمال خطا در جراحی‌های حساس به حداقل می‌رسد.

- **کاهش خستگی جراح**

طراحی ارگونومیک باعث می‌شود جراح در عمل‌های طولانی مدت، تمرکز و راحتی خود را حفظ کند.

- **ارتقای اعتبار مرکز درمانی**

مجهز شدن به تکنولوژی‌های روز Zumax، سطح خدمات تخصصی کلینیک شما را با افزایش سطح خدمات تخصصی ارتقا می‌دهد.

- **پایداری سرمایه‌گذاری**

با توجه به کیفیت ساخت بالا و تکنولوژی به‌روز، این دستگاه ابزاری ماندگار برای متخصصان است.





میکروسکوپ جراحی Zumax OMS2380

دقت بی‌نظیر؛ استاندارد جدید در جراحی‌های میکروسکوپی

معرفی محصول

میکروسکوپ جراحی Zumax OMS2380 یک شاهکار مهندسی اپتیکی است. برای متخصصانی طراحی شده است که در انجام حساس‌ترین جراحی‌ها، به بالاترین سطح از دقت نیاز دارند. این مدل با هدف برطرف کردن چالش‌های دید در جراحی‌های میکروسکوپی، با تمرکز بر شفافیت تصویر، میدان دید گسترده و ارگونومی بی‌نظیر توسعه یافته است. OMS2380 نه تنها یک ابزار مشاهده، بلکه یک همراه استراتژیک برای جراحان است تا بتوانند با اطمینان کامل، پیچیده‌ترین پرونده‌ها را مدیریت کنند.



ویژگی‌های فنی و عملکردی

- **سیستم اپتیک با کیفیت سینمایی (High-End Optical System)**
بهره‌مندی از لنزهای اپتیکی با دقت بسیار بالا که انحرافات نوری (Aberrations) را به حداقل می‌رساند و تصویری با کنتراست فوق‌العاده و وضوح خیره‌کننده ارائه می‌دهد.
- **کنترل پیشرفته بزرگ‌نمایی (Advanced Magnification Control)**
قابلیت تنظیم دقیق و نرم میزان بزرگ‌نمایی، که اجازه می‌دهد جراح به سرعت بین مشاهده ساختارهای کلی و تمرکز بر جزئیات بسیار ریز (Micro-details) جابه‌جا شود.
- **نورپردازی متمرکز و بدون حرارت (Cool LED Illumination)**
مجهز به سیستم روشنایی پیشرفته با تکنولوژی LED که نور را به صورت متمرکز و یکنواخت بر ناحیه هدف می‌تاباند و بدون افزایش دمای بافت، دیدی کاملاً شفاف و بدون سایه فراهم می‌کند.
- **طراحی ارگونومیک و پایداری بالا (Ergonomic & Stable Design)**
سیستم حرکتی (Arm System) بسیار نرم و پایدار که اجازه می‌دهد میکروسکوپ با کمترین فشار و بدون لرزش، در هر زاویه‌ای که جراح نیاز دارد، تثبیت شود.
- **میدان دید وسیع (Expansive Field of View)**
طراحی بهینه‌شده برای فراهم کردن میدان دید گسترده‌تر، که باعث می‌شود جراح بدون نیاز به حرکت مداوم سر یا دستگاه، محیط وسیع‌تری از ناحیه عمل را تحت کنترل داشته باشد.





Microscope / OMS2380

کاربردهای اصلی

میکروسکوپ OMS2380 برای طیف وسیعی از تخصص‌های حساس بهینه‌سازی شده است:

- دندان‌پزشکی تخصصی (Advanced Dentistry)

بهترین انتخاب برای متخصصان اندودانتیکس (درمان ریشه)، جراحی‌های پریودنتال و بازسازی‌های بسیار ظریف دندان.

- جراحی‌های میکروسکوپی عمومی

مناسب برای انجام عمل‌هایی که نیاز به مشاهده دقیق عروق، اعصاب و ساختارهای بسیار ظریف بافتی دارند.

- جراحی‌های میکروسکوپی تخصصی

کاربرد در حوزه‌هایی که دقت میلی‌متری و مشاهده بافت با وضوح بالا حرف اول را می‌زند.

مزایای رقابتی

- کاهش خطای انسانی

دید بسیار دقیق باعث می‌شود جراح با دید کامل نسبت به بافت‌ها، تصمیمات دقیق‌تری در حین عمل بگیرد و ریسک آسیب به بافت‌های سالم کاهش یابد.

- افزایش راحتی و طول عمر شغلی جراح

طراحی ارگونومیک باعث می‌شود خستگی فیزیکی (گردن، کمر و چشم) در جراحی‌های طولانی‌مدت به حداقل برسد.

- ارتقای سطح کیفی درمان

استفاده از این تکنولوژی، سطح خدمات درمانی مرکز یا کلینیک شما را به استانداردهای جهانی نزدیک کرده و رضایت بیماران را افزایش می‌دهد.

- ماندگاری و بهره‌وری بالا

با توجه به کیفیت ساخت بدنه و سیستم‌های الکترونیکی، این دستگاه سرمایه‌گذاری بلندمدتی برای متخصصان است.

مشخصات کلی (General Specifications)

نام برند: Zumax Medical Co., Ltd

مدل محصول: OMS2380

دسته بندی: Surgical Microscope (Professional Series)

تکنولوژی اصلی: High-Definition Optics & LED Illumination

سازگاری: مناسب برای کلینیک‌های خصوصی، بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی.





میکروسکوپ جراحی Zumax OMS3200

اوج مهندسی اپتیک؛ دقت بدون مرز برای جراحان پیشرو

معرفی محصول

میکروسکوپ جراحی Zumax OMS3200، فراتر از یک ابزار مشاهده، یک پلتفرم اپتیکی پیشرفته است که برای جراحانی طراحی شده که به دنبال بی نقص بودن (Perfection) در هر میلی متر از عمل خود هستند. این مدل، پرچمدار سری پیشرفته Zumax است که با ترکیب تکنولوژی های نوین نوری و طراحی ارگونومیک سطح بالا، شکاف بین چشم جراح و ریزترین ساختارهای بیولوژیکی را از بین می برد. OMS3200 پاسخی به نیازهای جراحی های فوق دقیق در محیط های درمانی مدرن است.

ویژگی های فنی و عملکردی

• سیستم اپتیک فوق پیشرفته (Elite Optical System)

بهره مندی از لنزهای با کیفیت سینمایی که انحرافات نوری (Aberrations) و اعوجاج رنگی را به صفر نزدیک می کند. این سیستم شفافیت و کنتراست تصویری را در بالاترین سطح بزرگنمایی تضمین می کند.

• بزرگنمایی هوشمند و دقیق (Precision Magnification)

قابلیت تنظیم بسیار نرم و بدون لرزش میزان بزرگنمایی، که اجازه می دهد جراح بدون قطع شدن تمرکز خود، به سرعت بین دید کلی و دید میکروسکوپی جابه جا شود.

• نورپردازی پیشرفته با تکنولوژی نوری (Advanced Illumination)

مجهز به سیستم روشنایی اختصاصی با قابلیت تنظیم دقیق شدت نور و دمای رنگ، جهت حذف کامل سایه ها و فراهم کردن نوری که بافت ها را با رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد.

• ساختار ارگونومیک و پایداری فوق العاده (Superior Ergonomics & Stability)

طراحی بازوهای حرکتی با استفاده از متریال های بسیار مستحکم و در عین حال سبک، که لرزش های میکروسکوپی را به حداقل رسانده و جابه جایی میکروسکوپ را در هر زاویه ای کاملاً نرم و روان می کند.

• میدان دید و عمق میدان استثنایی (Extraordinary Field of View)

ارائه تصویری وسیع و عمیق که باعث می شود جراح بدون نیاز به تغییر مداوم فاصله یا تنظیم مجدد، بخش بزرگی از ناحیه جراحی را با وضوح کامل تحت نظر داشته باشد.

• فاصله کاری (working distance)

فوکوس نرم و روان موتورایز با قابلیت تنظیم فاصله کاری از 200 تا 460 میلیمتر.





کاربردهای اصلی

مدل OMS3200 برای محیط‌هایی که دقت در آن‌ها حیاتی است، بهینه‌سازی شده است:

- **دندان‌پزشکی فوق تخصصی**
درمان‌های ریشه بسیار پیچیده (Endodontics)، جراحی‌های میکروسکوپی پریودنتال و بازسازی‌های بافت دندان.
- **جراحی‌های میکروسکوپی حساس**
انجام عمل‌های ظریف در حوزه‌های عروق، اعصاب و بافت‌های بسیار حساس که نیازمند دقت بسیار زیاد است.
- **مراکز آموزشی و تحقیقاتی**
ایده‌آل برای دانشگاه‌ها و جراحان پیشرو که نیاز به نمایش دقیق جزئیات برای آموزش و تحقیق دارند.

مزایای رقابتی

- **کاهش ریسک و خطای جراحی**
دید شفاف و بدون لرزش، احتمال آسیب به ساختارهای حیاتی (مانند عروق و اعصاب) را به شدت کاهش می‌دهد.
- **ارتقای عملکرد و تمرکز جراح**
طراحی ارگونومیک باعث کاهش فشار فیزیکی بر گردن، کمر و چشم‌ها شده و اجازه می‌دهد جراح در عمل‌های طولانی‌مدت، تمرکز ذهنی خود را حفظ کند.
- **پرستیژ و اعتبار علمی**
تجهیز کلینیک یا بیمارستان به مدل OMS3200، نشان‌دهنده تعهد شما به بالاترین استانداردهای جهانی در ارائه خدمات پزشکی است.
- **سرمایه‌گذاری بلندمدت**
با توجه به کیفیت ساخت فوق‌العاده و تکنولوژی به‌روز، این دستگاه ابزاری ماندگار برای آینده حرفه‌ای متخصصان است.

مشخصات کلی (General Specifications)

نام برند: Zumax Medical Co., Ltd

مدل محصول: OMS3200 (High-End Series)

دسته بندی: Professional Surgical Microscope

تکنولوژی اصلی: High-Definition Optics & Intelligent LED Illumination

سازگاری: مناسب برای کلینیک‌های تخصصی، بیمارستان‌های پیشرفته و مراکز تحقیقاتی.





میکروسکوپ جراحی Zumax OMS3500

دقت در جزئیات؛ کمال در بازسازی

معرفی محصول

میکروسکوپ جراحی Zumax OMS3500، ابزاری

استراتژیک برای جراحان پیشرو در حوزه‌های

جراحی پلاستیک، بازسازی و میکرو جراحی‌های

عروقی است. در دنیایی که میلی‌مترها تعیین‌کننده

نتیجه نهایی و زیبایی عمل هستند، OMS3500

با ارائه وضوح بی‌نظیر، به جراح اجازه می‌دهد

تا با دقتی ریاضی، بافت‌ها را بازسازی کرده و پیوندهای

عروقی و عصبی را با بالاترین سطح اطمینان برقرار کند.

این دستگاه، فراتر از یک میکروسکوپ، کلید دستیابی به نتایج جراحی بی‌عیب و نقص است.

ویژگی‌های فنی و عملکردی

• اپتیک با وضوح فوق‌العاده (Ultra-High Resolution Optics)

طراحی شده با تمرکز بر نمایش دقیق بافت‌ها و کنتراست رنگی بالا؛ این ویژگی برای

تشخیص مرزهای دقیق بافت در جراحی‌های بازسازی و پیوند بسیار حیاتی است.

• سیستم نورپردازی میکروسکوپی (Precision Illumination)

مجهز به سیستم روشنایی هوشمند با کنترل دقیق نور، جهت حذف کامل سایه‌ها در

فضاهای بسیار کوچک و محدود (مثل محل اتصال عروق یا پیوند پوست).

• بزرگ نمایی با عمق میدان بالا (High Magnification & Depth of Field)

ارائه تصویری که در آن حتی با تغییر کوچک فاصله، وضوح تصویر حفظ می‌شود؛ این ویژگی

به جراح اجازه می‌دهد تا در حین کار کردن با ابزارهای ظریف، تمرکز بصری خود را از دست ندهد.

• ارگونومی تخصصی برای جراحی‌های طولانی (Specialized Ergonomics)

طراحی بدنه و بازوهای حرکتی به گونه‌ای است که جراح می‌تواند در پوزیشن‌های مختلف

جراحی (از حالت نشسته تا ایستاده) با کمترین حرکت فیزیکی، بهترین زاویه دید را به

دست آورد.

• پایداری نوری و مکانیکی (Micro-Stability)

سیستم تثبیت‌کننده پیشرفته که حتی کوچک‌ترین لرزش‌های محیطی یا حرکات جزئی

را جذب کرده و تصویری کاملاً ثابت و شفاف را ارائه می‌دهد.





Microscope / OMS3500

کاربردهای اصلی

مدل OMS3500 به طور اختصاصی برای تخصص‌های زیر بهینه سازی شده است:

- جراحی پلاستیک و زیبایی (Plastic Surgery)

بازسازی بافت‌ها، جراحی‌های پوست و اصلاحات ظریف زیبایی.

- جراحی بازسازی (Reconstructive Surgery)

پیوند بافت‌ها و بازسازی ساختارهای آسیب‌دیده.

- جراحی میکرو-عروقی (Microsurgery)

اتصال عروق بسیار ریز و اعصاب (Microvascular anastomosis) که نیازمند بالاترین سطح دقت اپتیکی است.

مزایای رقابتی

- دقت در نتیجه‌های زیبایی

با دید بهتر، جراح می‌تواند برش‌ها و بخیه‌ها را با ظرافت بیشتری انجام دهد که منجر به نتایج زیباتر و بهبود روند ترمیم بافت می‌شود.

- افزایش نرخ موفقیت در پیوندهای میکروسکوپی

وضوح بالا در مشاهده عروق ریز، احتمال موفقیت در پیوندهای میکرو - عروقی را به شدت افزایش می‌دهد.

- کاهش استرس و خستگی جراح

سیستم اپتیکی و ارگونومیک این دستگاه، فشار عصبی و فیزیکی ناشی از تمرکز طولانی مدت بر روی جزئیات بسیار ریز را به حداقل می‌رساند.

- استاندارد طلایی در اتاق عمل

تجهیز به OMS3500، نشان‌دهنده به‌روز بودن و سطح بالای تخصص در انجام جراحی‌های بازسازی و پیوند است.

- مناسب برای جراحان پلاستیک، جراحان بازسازی، جراحان مغز و اعصاب و مراکز فوق تخصصی جراحی.

مشخصات کلی (General Specifications)

نام برند: Zumax Medical Co., Ltd

مدل محصول: OMS3500 (Plastic & Reconstructive Series)

دسته بندی: Specialized Microsurgical System

تکنولوژی اصلی: High-Contrast Micro-Optics & Precision Lighting

مناسب برای جراحان پلاستیک، جراحان بازسازی، متخصصین میکرو - عروق و مراکز فوق تخصصی جراحی.





برای دسترسی به هر کدام نماد مربوطه را انتخاب کنید



www.tdpdent.com



[tdpdent](https://www.instagram.com/tdpdent)

02186194212 >

آدرس دفتر مرکزی

ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه دوم، واحد ۲۰۴



طراحی و اجرا توسط پیکو دیزاین

WWW.PIKODESIGN.IR